


電位治療の操作方法

1 本体を水平な場所に置きます。

2 通電シートを接続します。

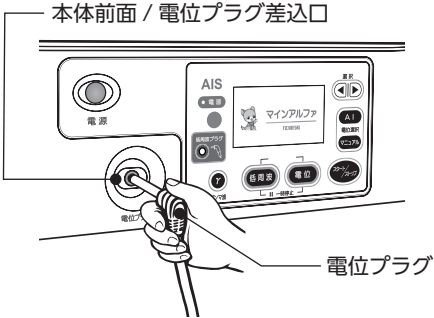


注意 通電シートの電位プラグは電位プラグ差込口に根元まで確実に差し込んでください。低周波コードは必ず抜いてください。

3 絶縁マットを準備します。(絶縁マットは折りたたまずに全て広げた状態で敷いてください。)


木製イスに座って治療を行う場合

絶縁マットの上にイスを置き、イスの座面に通電シートを広げて置きます。※イスは壁から5cm以上離してください。

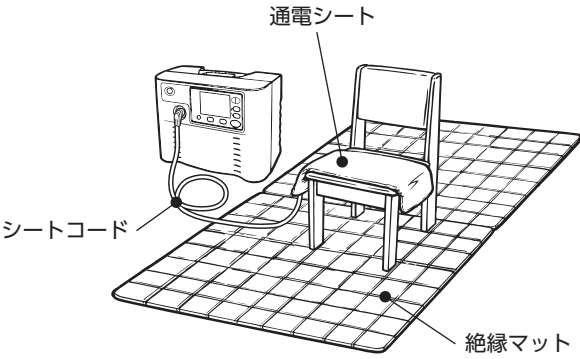


横になって治療を行う場合

絶縁マットの上にお手持ちの布団を敷き、腰のあたりに通電シートを広げて置きます。

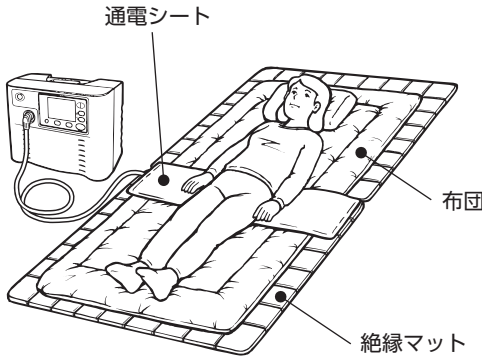


4 電源プラグをコンセントに確実に差し込みます。

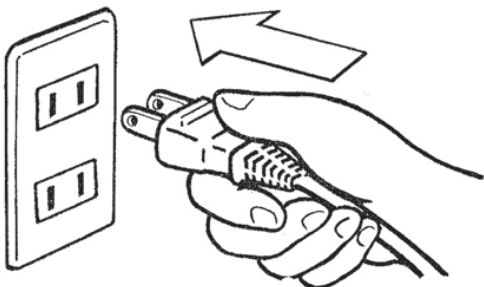


5 電源を入れます。

本体の「電源ボタン」を押し、電源を入れます。「電源ボタン」を押すと表示パネルに下の画面が表示され3秒後に治療選択画面に切り替わります。

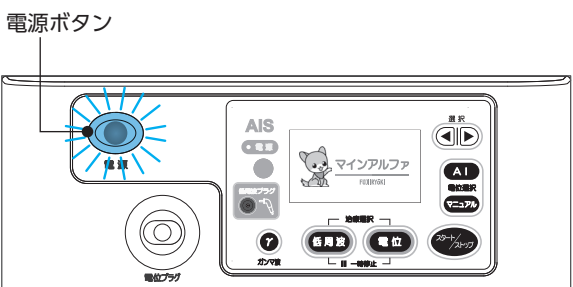

6 治療選択画面で、電位を選択します。

治療選択の「電位」ボタンを押してください。

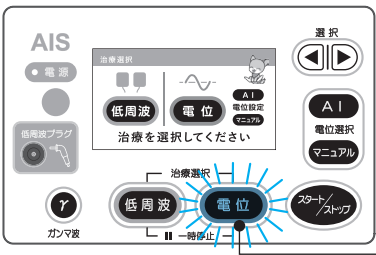

※電位プラグが差し込まれていないとエラー表示されます。電位プラグを差し込んでから操作してください。

※低周波プラグが差し込まれていると、エラー表示されます。低周波コードを外してから操作してください。

通電シートを接続してください

低周波コードを外してください


※ 画面に案内が表示されます。

※ 画面に案内が表示されます。


7 お好みのコースを選択します。

「選択ボタン」でコースを選択します。「選択ボタン」を押すごとに電位コース表示が切り替わります。

「やさしい」↔「しっかり」↔「ゆったり」↔「やさしい」……と切り替わります。

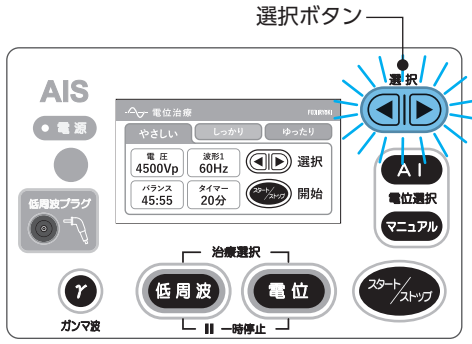


やさしいコース

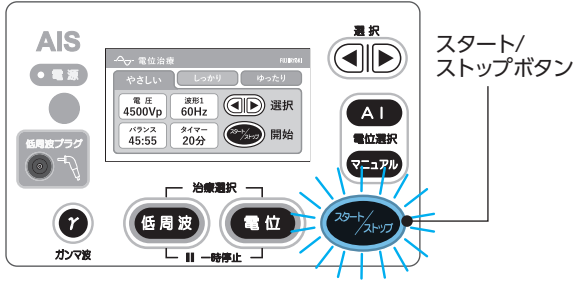

「やさしいコース」は以下の設定でスタートします。

電 圧	4500Vp
波 形	波形1
周 波 数	60Hz
バランス	45:55
タイマー	20分

しっかりコース

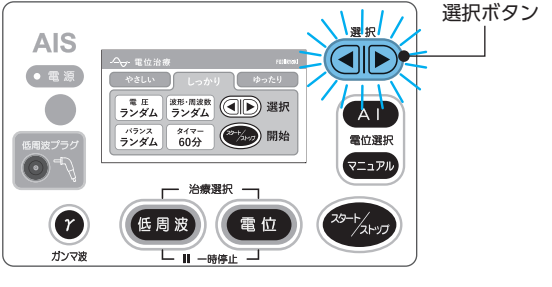

「しっかりコース」は以下の設定でスタートします。


電 圧	ランダム
波 形	ランダム
周 波 数	ランダム
バランス	ランダム
タイマー	60分

※ランダムとは、3分ごとに電圧、波形、周波数、バランスが自動的に選択され出力します。


※しっかりコースのみ治療中に選択ボタンでバランス値を変更できます

8 治療を開始します。

「スタート/ストップボタン」を押すと治療を開始します。※治療中に「電位ボタン」を押すごとで一時停止することができます。再度押すと、再開できます。※一時停止状態が10分間続くと自動的に治療選択画面に移ります。

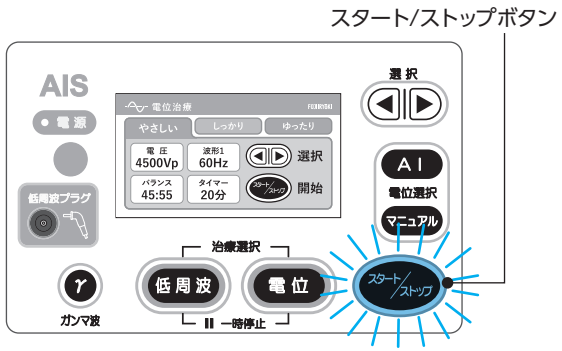

ゆったりコース

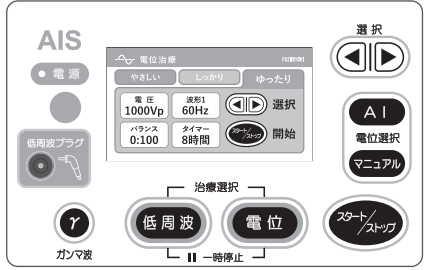


「ゆったりコース」は以下の設定でスタートします。

電 圧	1000Vp
波 形	波形1
周 波 数	60Hz
バランス	0:100
タイマー	8時間

※ゆったりコースのタイマーは8時間になります。

※電位出力開始から5分経過後、オートナイトモード機能により表示パネル画面が自動的に暗くなります。

AI/マニュアルコース

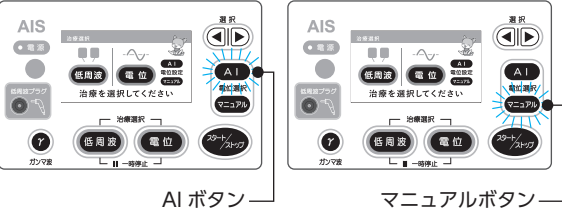

AIコースは、ご使用者の身体情報を入力設定することで、本器があなたに合わせた治療内容を決定しランダムに出力するコースです。


マニュアルコースは、お好みの出力設定を詳細に選択することができます。

「オートメモリー機能」AIコース・マニュアルコースで、前回と同じ設定で良い場合は、情報入力は不要です。


低周波治療の操作方法

1 本体を水平な場所に置きます。

2 低周波ピンに低周波パッドを取付けます。

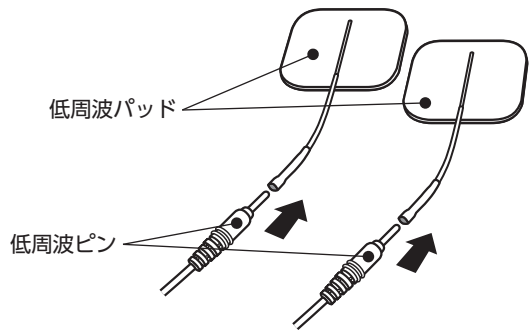


3 低周波コードを接続します。

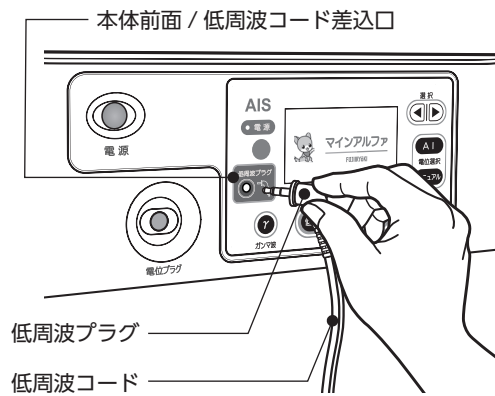


注意 低周波プラグは低周波コード差込口に根元まで確実に差し込んでください。

4 電源プラグをコンセントに確実に差し込みます。

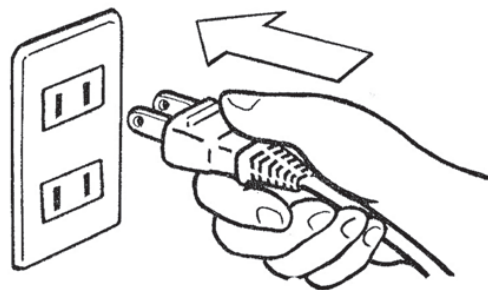


5 身体に低周波パッドを貼付けます。

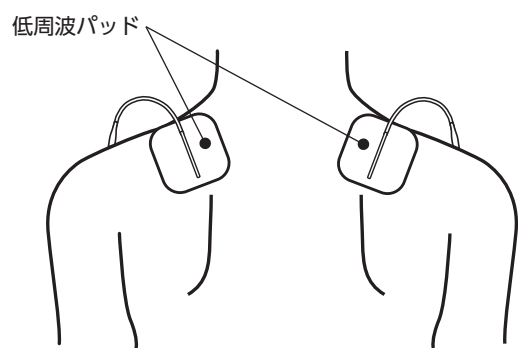

6 電源を入れます。

本体の「電源ボタン」を押し、電源を入れます。「電源ボタン」を押すと表示パネルに下の画面が表示され3秒後に治療選択画面に切り替わります。

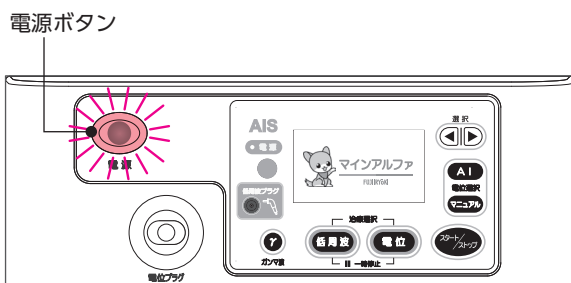

7 治療選択画面で、低周波を選択します。

治療選択の「低周波」ボタンを押してください。



低周波ボタン

※低周波プラグが差し込まれていないとエラー表示されます。低周波プラグを差し込んでから操作してください。


低周波コードとパッドを接続してください

※ 画面に案内が表示されます。


8 お好みのコースを選択します。 ———— 患部の特性に対応した 5 つの自動コース設定

「選択ボタン」でコースを選択します。
※「選択ボタン」を押すごとに低周波コース表示が切り替わります。
「肩」⇔「腕」⇔「ひざ」⇔「腕」⇔「EMS+M.カレント」⇔「肩」…と切り替わります。


「肩」、「腕」、「腰」、「ひざ」、「EMS+M.カレント」の5つの自動コース。それぞれの患部に合わせたプログラムを設定しています。

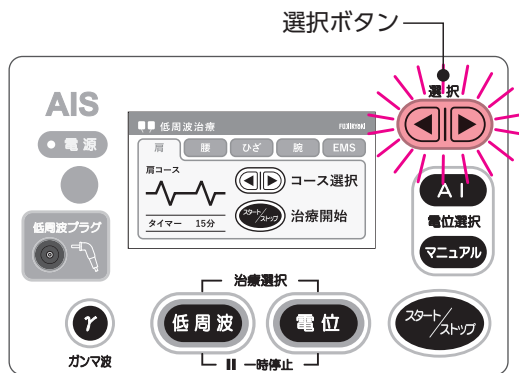


肩コース

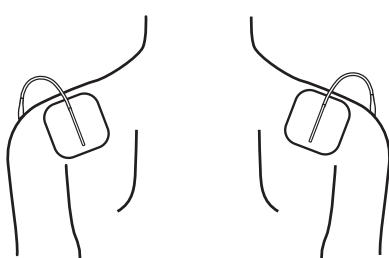

腕コース

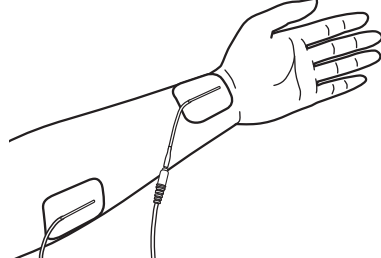

腰コース

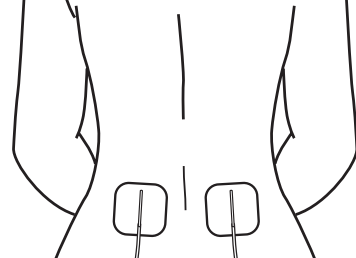


9 治療を開始し、出力レベルを設定します。

「スタート/ストップボタン」を押すと治療を開始します。
選択ボタンで低周波出力調節します。
低周波出力Lvは「1」→「2」…→「20」の20段階で設定することができます。
※出力Lvは、出力バーでも表示されます。




選択ボタン

ひざコース

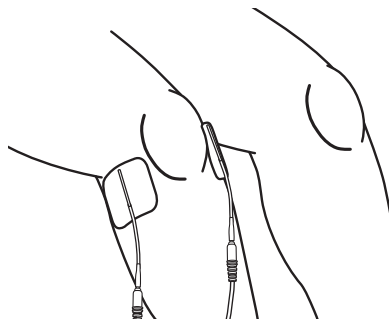

EMS+M.カレントコース

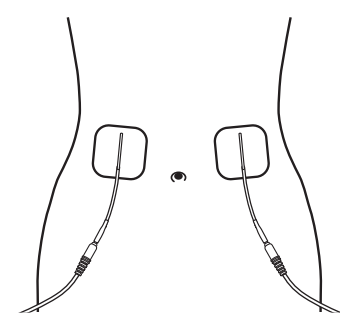

トレーニングと同等の収縮と弛緩を行うEMSと痛みや疲れをやわらげるMCRを交互に使用できます。

EMS イーエムエス

どこでも手軽に筋肉トレーニングを行えます。

MCR エムシーアール

運動後の疲労回復や関節の痛みをやわらげます。
※MCR(M.カレント)出力時は体感がありません。

治療中に「低周波」(一時停止)ボタンを押すと一時停止することができます。
再度、「低周波」ボタンを押すと再開します。(一時停止中はタイマーが停止します)
治療を中断すると、出力Lv(レベル)が自動的に「0」になり出力されません。
再開後は、出力レベル1になり選択ボタン(▶)で好みの強さに再度調節してください。

低周波ボタン



必ず安全のために
お守りください

危険

- 次のような医用電気機器との併用は、誤作動を招く影響を与える恐れがありますので、ご使用にならないでください。
● ベースメカ、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器 ● 心電計等の装着形医用電気機器
■ 心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は、ご使用にならないでください。

警告
注意

- 次の方はご使用をさけるか、必ず医師にご相談のうえご使用ください。● 脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性(疼痛性)疾患の方 ● 妊娠初期の不安定期、または出産直後の方 ● 悪性腫瘍のある方 ● 心臓に障害のある方 ● 安静を必要とする方 ● 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ● 体温38℃以上(有熱期)の方 ● 急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期や衰弱しているとき ● 感染症疾患のある方 ● 自分で意思表示できない方 ● 酒気帯びしている方 ● 医師の治療を受けている方や、特に身体に異常を感じているとき
■ 次の方は、取り扱える人が必ず付き添ってご使用ください。● 介護が必要な方、子供 ● 取扱説明書の内容を理解できない方 ● ご自身以外(友人など)の方がご使用されるときは、付き添うか、よく説明してご使用させてください。お使いになる方に、取扱説明書を読んでからお使いになるようにご説明ください。 ● 乳幼児および身体に障害のある方にはご使用にならないでください。 ● 飲酒時や、睡眠薬を飲んだときはご使用にならないでください。 ● 導子が濡れている時は、ご使用にならないでください。 ● ご使用中の人には触れないようにしてください。● ご使用中、身体に異常を感じたときには、直ちに使用を中止してください。

美と健康の総合メーカー

株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

フジ医療器フリーダイヤル

0120-027-612

受付: 平日9:00~17:30(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web www.fujiiryoki.co.jp

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

FAX番号 06-4793-0818