

Relax Solution

販売名：マッサージチェア HJ25

品番：SKS-T1000

医療機器認証番号：307AHBZX00005000

類別：機械器具 77 バイブレーター

管理医療機器 一般的名称：家庭用電気マッサージ器

取扱説明書

添付文書

保証書付
裏表紙にあります

設置方法については、
9～14ページに従って
行ってください。

安全上のご注意

・安全上のご注意.....2

各部のなまえのはたらき

・各部のなまえとはたらき.....6

設置と組み立て/ご使用前の準備

・本体と付属品.....9
・アームレストの準備.....11
・枕の使いかた.....13
・毎回マッサージをはじめる前に.....15

使いかた

・リクライニングの調節.....16
・各種設定.....17
・自動コースでマッサージする.....18
・マニュアルマッサージをする.....20
・マッサージ中の各種調節.....21
・スピーカーの使いかた.....24

Q&A/お手入れ/保証とアフターサービス/仕様

・Q&A.....26
・お手入れと保管のしかた.....28
・故障かなと思ったら.....29
・保証とアフターサービス.....31
・仕様.....32
・保証書.....裏表紙

使用目的または効果

あんま、マッサージの代用

疲労回復・血行をよくする

筋肉の疲れをとる・筋肉のこりをほぐす

神経痛、筋肉痛の痛みの緩解

一般家庭で使用するこ

- このたびは当社のマッサージチェアをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用の前に、「安全上のご注意」(2～5ページ)を必ずお読みください。
- お読みにになった後は、いつでも見ることできる場所に必ず保管してください。
- 包装に使用しているダンボールなどは、分別のうえリサイクルにご協力をお願いします。

安全上のご注意

- ・ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 - ・ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。
 - ・表示と内容は、次のようになっています。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡や重傷を負う可能性のある内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、※物的損害が発生する可能性がある内容を示します。

※ 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

< 絵表示の例 >

	⊘ 記号は、禁止（してはいけないこと）を示します。 （左図は、分解禁止）
	● 記号は、強制（必ず守ること）を示します。 （左図は、電源プラグをコンセントから抜く）

- ・本取扱説明書をお読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることのできる場所に、必ず保存してください。

警告

	使用前には、必ずマッサージ部のカバーやその他の部分が破れていないか確認する。 破れがあった場合は、小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼する。また、カバーを外した状態で使用しないこと。 カバーが破れたり外した状態で使用すると、感電やけが、衣服や髪が巻き込まれるおそれがあります。
	次の人は、使用前に医師と相談のうえ、使用する。 ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ・悪性しゅよう（腫瘍）のある人 ・心臓に障害のある人 ・妊娠中、または出産直後の人 ・糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ・皮膚に創傷のある人 ・安静を必要とする人 ・温度感覚喪失が認められる人 ・体温 38℃以上（有熱期）の人（例：急性炎症症状 [けん（倦） 怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期。衰弱しているとき。） ・骨粗しょう（鬆）症の人、せきつい（脊椎）を骨折している人捻挫肉離れなどの急性 [とう（疼） 痛性] 疾患の人 ・背骨（脊椎）に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人 ・椎間板ヘルニア症の人 ・腱鞘炎の人 ・その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人
	この機器はヒーターを内蔵し表面が熱くなるため、熱に敏感でない人は十分注意を払って使用する。 下記に該当する場合は特に注意する。 ・お年寄り、ご病人、ご自分で操作ができない人 ・皮膚の温感（温度感覚）の弱い人 ・眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された人 ・深酒・疲労の激しい人 ・血行障害（糖尿病など）の人 ・医師より注意を受けている人 低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。

⚠ 警告

	動かなくなったり異常がある場合はすぐに電源を切り、電源プラグを抜いて、ご購入先または当社のお客様相談窓口にて点検・修理を依頼する。 感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。
	首周辺をマッサージするときは、もみ玉の動きに注意する。首の前方は避け、過度に強いマッサージとならないように注意する。 事故やけがのおそれがあります。
	リクライニングするときや脚部を動かすときは、必ず周囲（本体の後部、前部、側部、下部など）に人やペット、物がないことを確認する。 事故やけが、家財を傷めるおそれがあります。
	リクライニングするときや脚部を動かすときは、以下のような本体の隙間に手、指、脚や頭を入れないようにする。 事故やけがのおそれがあります。 ・ 椅子の下側 ・ 背もたれ部と座部、腕部の隙間 ・ 脚部と座部、腕部の隙間 ・ 脚部の下側、脚部の裏側 ・ 背もたれ部の後ろの隙間
	電源プラグは確実に根元まで差し込む。また、ゴミが付着しないように注意する。 感電やショート・発火の原因になります。
	この機器で遊ぶことがないように、お子様を監視することが望ましい。 事故やけがのおそれがあります。
	次の人は、使用しない。 身体に異常が起こる場合があります。 医師からマッサージを禁じられている人 （例：血栓 [そく（塞） 栓] 症、重度の動脈りゅう（瘤）、急性静脈りゅう（瘤）、各種皮膚炎および皮膚感染症（皮下組織の炎症を含む）など）
	ヒーターは長時間使用しない。また、同一箇所に長時間触れるような使い方をしない。 低温やけどを起こすおそれがあります。比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮膚の同じ箇所に触れていると、低温やけどのおそれがあります。 低温やけどについて ・ 低温やけどは、皮膚の深部までおよび、赤い斑点や水ぶくれができてるのが特徴です。 ・ 万一、赤い斑点や水ぶくれができたときは、直ちに専門医の診察を受けてください。
	本体（背もたれ部、脚部、腕部）のカバーを故意に外したり、破いたり、切り取ったりしない。 カバーが外れたり破れた状態で使用すると、衣服や髪が巻き込まれけがのおそれがあります。
	交流 100V 以外の電源は、使用しない。 火災や感電の原因になります。
	破損している電源コードや電源プラグを使用しない。 感電やショート、火災の原因になります。破損している場合は、ご購入先または当社のお客様相談窓口にて修理を依頼してください。
	ご自分で意思表示ができない人、または操作できない人には使用させない。また、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人に単独で使わせない。 事故やけがのおそれがあります。
	お子様には使用させない。お子様を椅子の上で遊ばせたり、上に乗らせない。 また、幼児を近づけない。 故障や事故、けがのおそれがあります。
	ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。 感電のおそれがあります。
	浴室など湿気の多い場所で使用したり、保管しない。 感電・火災・故障・カビ・サビの原因になります。
	絶対に改造しない。また、ご自分で分解、修理をしない。 発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。

安全上のご注意

⚠ 注意

!	使用時間は1回15分以内にする。また、同一箇所への連続しての使用は5分以内にする。 長時間のご使用は筋肉や神経を痛めることがあります。 ＜お願い＞1日の使用は1人30分以内にしてください。
	健康な方でも下記のような人は必ず医師と相談のうえ使用する。 ・加齢により筋肉の衰えた人や痩身の人　・骨や内臓に起因する腰痛の人 ・打ち身やねんざしやすい人　・乗物酔いの激しい人　・過去に心臓や内臓の手術をされた人 守らないと健康をそこなうおそれがあります。
	水平な場所で使用する。故障や事故の原因になります。
	操作ボタンやタイマーなどが正常に動作することを確認してから使用する。 事故やけがのおそれがあります。
	しばらく使用していなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、本品が正常に動作することを確認してから使用する。事故やけがのおそれがあります。
	使用前に、本体（背もたれ部、脚部、腕部）に異物がはさまっていないか確認する。 事故やけがのおそれがあります。
	もみ玉が収納位置にあることを確認してから、ゆっくり座る。事故やけがの原因になります。
	使用中に身体に異常があらわれたり感じたときや、しばらく使用しても効果があらわれない場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談する。守らないと事故や体調不良のおそれがあります。
	本品の使用によって発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師に相談する。守らないと事故や体調不良のおそれがあります。
	使用後は背もたれ部を完全に起こし、脚部を完全に下ろす。事故やけがの原因になります。
	使用後は本体の電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。 お子様のいたずらなどによる事故の原因になります。
	コード類はねじれをほどこいて保管する。感電や火災、故障の原因になります。
	使い始めは、弱い刺激でマッサージする。けがのおそれがあります。
	本体及び付属品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理する。 詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。
⚡	定期的にお手入れを行う。 本体は清潔にし、温度・湿度・ほこりなどの悪影響が少ないところに保管してください。
	アースを確実に取り付ける。 アースを取り付けていないと、故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
	停電のときは直ちに電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。 再通電されたとき事故の原因になります。
	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く。 感電や、ショートして発火の原因になります。
	使用後や使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。 ほこりや湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災の原因になります。
	お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。感電やけがのおそれがあります。

⚠ 注意



電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。

・ 傷つけない ・ 破損させない ・ 加工しない ・ 無理に曲げたり、引っ張らない
・ ねじらない ・ 束ねない ・ 重いものを載せない ・ 挟み込まない
感電や火災、故障の原因になります。

食後すぐや、飲酒後は使用しない。 気分が悪くなったり、事故やけがのおそれがあります。

ストーブなどの火気の近くやホットカーペットなど暖房器具の上で使用しない。また、たばこを吸いながら使用しない。 火災の原因になります。

背もたれ部、脚部、肩部、腕部に乗ったり、座ったりしない。また、座部に立ったりしない。
利用者や本体が転倒して、事故やけが、故障のおそれがあります。

リクライニングしているときや、脚部が上がった状態で、無理に乗り降りしたり、脚部・座部の前の方・背もたれ部の上部に乗らない。 利用者や本体が転倒して、事故やけがのおそれがあります。

脚部を収納するときは、足裏部に負荷をかけない。 縫製の破れや、床を傷めるおそれがあります。

付属品以外は使用しない。 故障の原因になります。

マッサージをするときは、ピアス・イヤリング・ネックレス・襟巻きなどの装飾品をつけたまま使用しない。 けがのおそれがあります。

手や腕をマッサージをするときは、つけ爪・時計・指輪・ブレスレットなどの硬いものを装着したまま使用しない。 けがのおそれがあります。

頭部に髪飾りなどの硬いものをつけて使用しない。 けがのおそれがあります。

腰・尻・ももをマッサージするときは、衣服（ズボンなど）のポケットに硬いものを入れたまま使用しない。 事故やけがのおそれがあります。

もみ玉に素肌をあてない。 素肌への直接のマッサージは皮膚を痛めることがあります。

ひじ、ひざ、頭部、腹部には使用しない。また、もみ玉部に手や足をはさまない。
体調不良やけがのおそれがあります。

足裏ローラーにつま先を当てない。 けがのおそれがあります。

マッサージ動作中に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを「OFF」にしない。
けがのおそれがあります。

使用中は眠らない。 無意識での使用は、体調不良やけがのおそれがあります。

人や物を乗せて移動しない。 故障やけがのおそれがあります。

本体に2人以上乗らない。 故障やけがのおそれがあります。

ベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などの薬品でふかない。
変色・変形・感電・引火のおそれがあります。

マッサージの目的以外には使用しない。 故障や事故の原因になります。

他の治療器を同時に使用しない。 事故や体調をくずすおそれがあります。


木床や畳など傷つきやすい床面で、引きずったり、キャスターを使って移動しない。
床面に傷がつくおそれがあります。

本体を倒したり、強い衝撃を与えない。 故障やけがのおそれがあります。


各部のなまえとはたらき

本体


前側

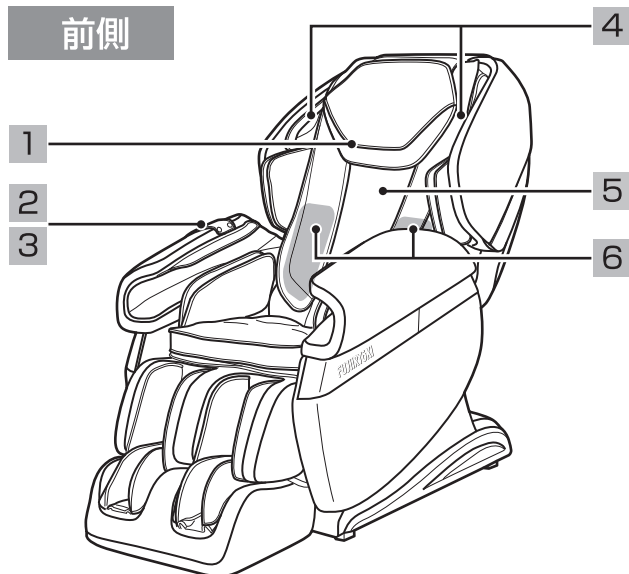

後側

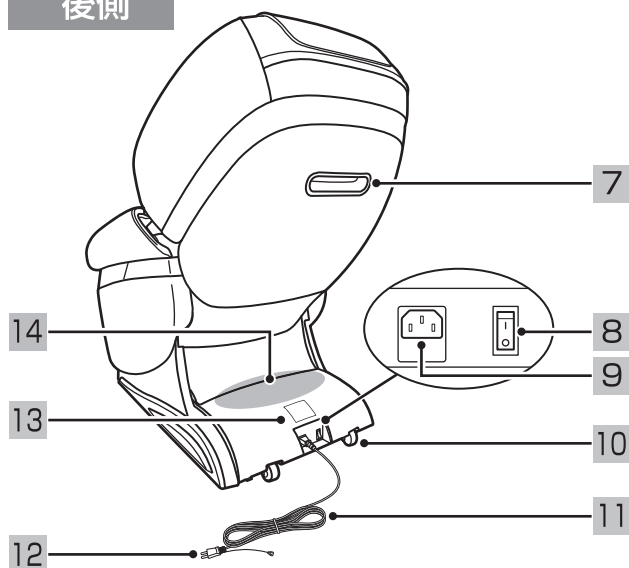

マッサージ位置

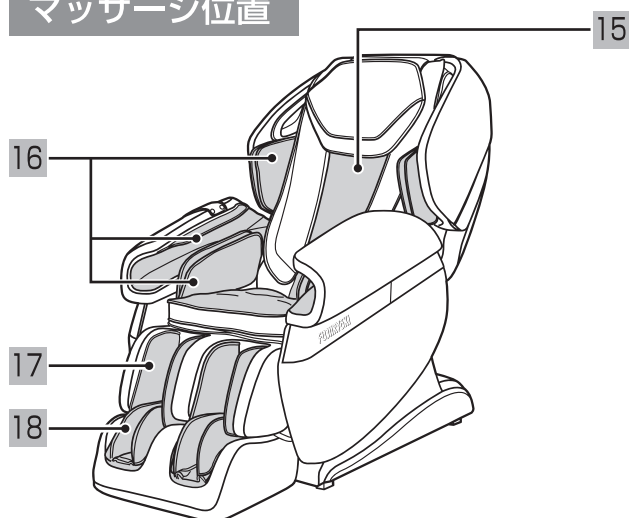

前側

- 1 **枕**
マッサージをするときは、後ろに回してください。
- 2 **リモコン**
本体の操作を行います。
- 3 **リモコンポケット**
リモコンを収納してください。
- 4 **BLUETOOTH スピーカー**
BLUETOOTH 接続で音楽を聴くことができます。
- 5 **背もたれ**
この上にゆったりともたれてください。
- 6 **ヒーター**
背パッドにヒーターを内蔵しています。

後側

- 7 **持ち手**
- 8 **電源スイッチ (主電源)**
ご使用後は「OFF」 にしてください。
- 9 **インレット (電源コード差込口)**
- 10 **キャスター**
- 11 **電源コード**
- 12 **電源プラグ**
- 13 **定格シール**
- 14 **挟み込み防止センサー**


マッサージ位置

- 15 **背もたれ部**
もみ玉で背中全体のマッサージを行います。
- 16 **肩部・腕部・腰部**
エアバッグでマッサージを行います。
- 17 **脚部 (ふくらはぎ)**
ふくらはぎ裏ローラーとエアバッグでふくらはぎのマッサージを行います。
- 18 **脚部 (足首・足裏)**
足裏ローラーとエアバッグによるマッサージを行います。

リモコン




● リモコン本体

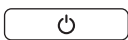①		電源ボタン	リモコンの電源の ON/OFF を行います。
②		急停止ボタン	すぐにマッサージを停止したいときに押してください。

各部のなまえとはたらき

リモコン：メインメニュー

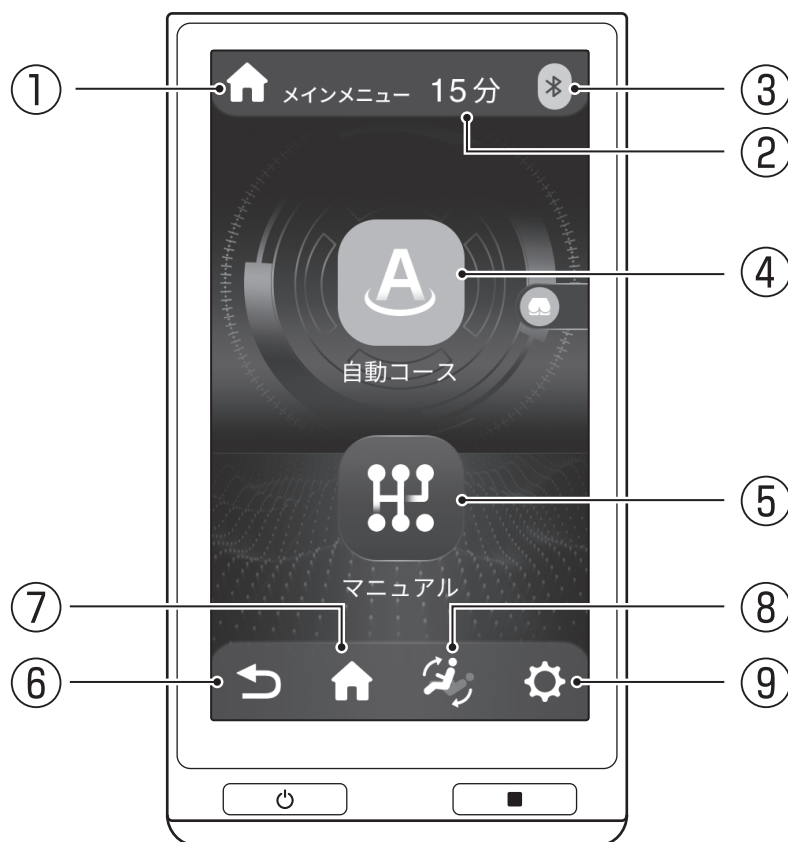

● ステータスエリア

①	 メインメニュー	選択内容表示	選択している内容を表示します。
②	 15分	タイマー表示エリア	マッサージの残り時間を表示します。
③		Bluetooth 表示	Bluetooth の接続状態を表示します。(P25)

● マッサージ選択

④		自動コースボタン	12 種類の自動コースを選択できます。(P18)
⑤		マニュアルボタン	マニュアルマッサージを開始します。(P20)

● ツール

⑥		戻るボタン	前の画面に戻ります。
⑦		メインメニューボタン	メインメニュー画面を表示します。
⑧		リクライニングボタン	リクライニング角度の調節を行います。(P16)
⑨		設定ボタン	リモコン画面の各種調節、Bluetooth 接続、チェアの自動収納の設定等を行います。(P17)

本体と付属品


！ 注意

- 付属品以外は使用しない。
故障の原因になります。


取扱説明書などの書類

- 取扱説明書
- カンタン操作ガイド

● 本体

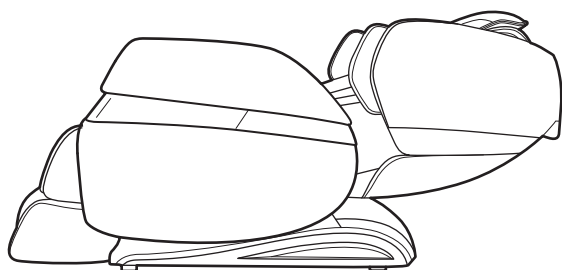


● 枕（取り外し可能）

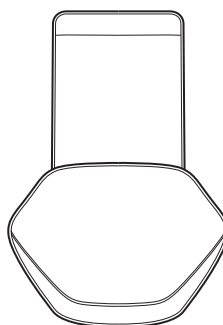


● 電源コード



● ネジ（4本）

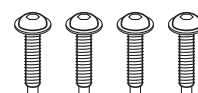

● 六角レンチ

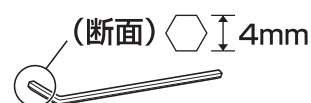

本体の設置場所を決める

！ 警告


浴室など湿気の多い場所で使用したり、保管しない。
感電・火災・故障・カビ・サビの原因になります。

！ 注意

水平な場所で使用する。
故障や事故の原因になります。
ストーブなどの火気の近くやホットカーペットなど
暖房器具の上で使用しない。また、たばこを吸いなが
ら使用しない。 火災の原因になります。

リクライニングできるように、後方向に 35cm 以上のスペースを必ず確保し、
水平なところに設置する。

- リクライニングしたときに周囲にあたらないよう、
あらかじめ前方向に 30cm 以上、後方向に 35cm
以上のスペースをあけてください。
- たたみや床を傷つけることがありますので、本体の
下にマットなどを敷くことをおすすめします。
- 直射日光が毎日長時間あたるところや、暖房器具の
近くなど、高温になるところへの設置は避けてくだ
さい。本体や付属品が変色したり、変質するおそれが
あります。

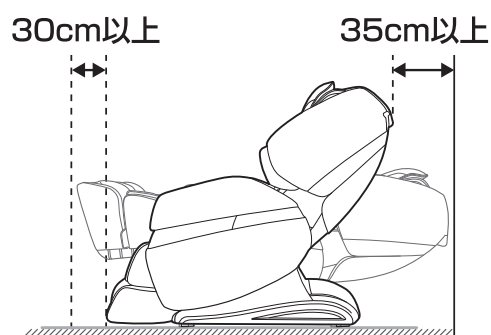


設置と組み立て

本体を設置する

！ 注意

人や物を乗せて移動しない。また、脚部を出したまま移動しない。
木床や畳など傷つきやすい床面で、引きずったり、キャスターを使って移動をしない。
電源コードやリモコンコードを脚に引っ掛けたり、キャスターに巻き込まない。

アームレスト下側 (A) と、背もたれ部の持ち手 (B) に手をかけ、持ち上げて移動する。

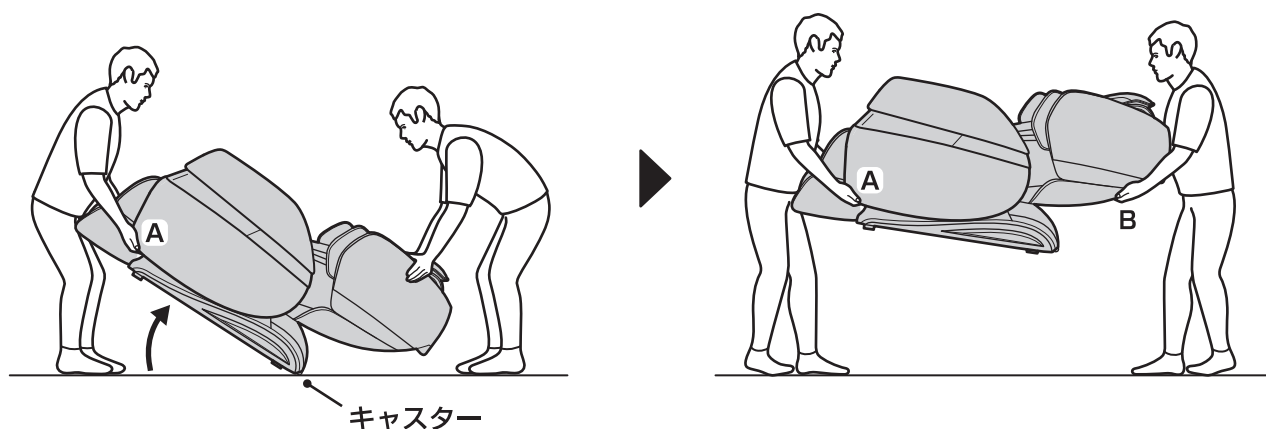

① アームレスト下側 (A) を持ち、キャスターを支点として (A) 側を持ち上げます。マッサージチェアの脚部が (A) を持つ人の足の付け根あたりに来るように、しっかりと持ち上げてください。(上図参照)


② 背もたれ側の人は持ち手 (B) に手をかけ、なおし、2人で同時に持ち上げます。

- 脚部を持って運ばないでください。
- 重量物ですので、必ず2人以上で運んでください。
- フローリングなどの傷つきやすい場所に設置する場合は、マッサージチェアを持ち上げて移動してください。
- 移動中にリモコンを落とさないよう、ご注意ください。
- ゆっくり慎重に運んでください。
- 足元に十分注意して、ゆっくり下ろしてください。

アームレストの準備 ※左右同様に行ってください。


購入時、アームレストは内側に収納されています。
搬入後に以下の作業を行い、使用可能な状態してください。

※アームレストを完全に広げずに使用すると、右図のような警告画面が表示され、マッサージを行うことができません。
手順 1 ～ 4 を参照し、アームレストを広げて固定してください。

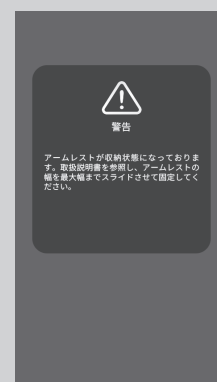

1. 図を参考にアームレストのファスナーを開け、ネジ穴（片側 2 か所）の位置を確認する。

脚側のネジ穴は、カバーとエアバッグをめくったところにあります。
背もたれ側のネジ穴は、カバーをめくったところにあります。

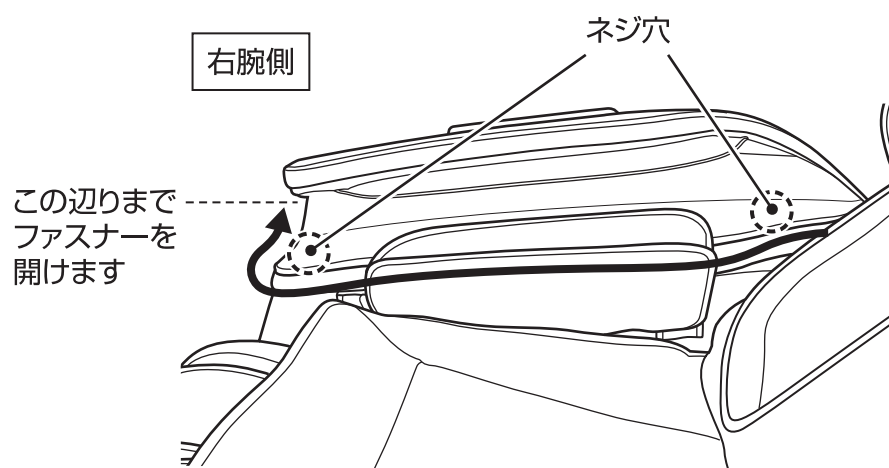


設置と組み立て

つづき（アームレストの準備）



2. アームレストを外側に広げる。

アームレストを手で持ち、外側にスライドするように広げてください。
上から見たときに、アームレストのネジ穴と土台のネジ穴が重なるところが正しい位置です。

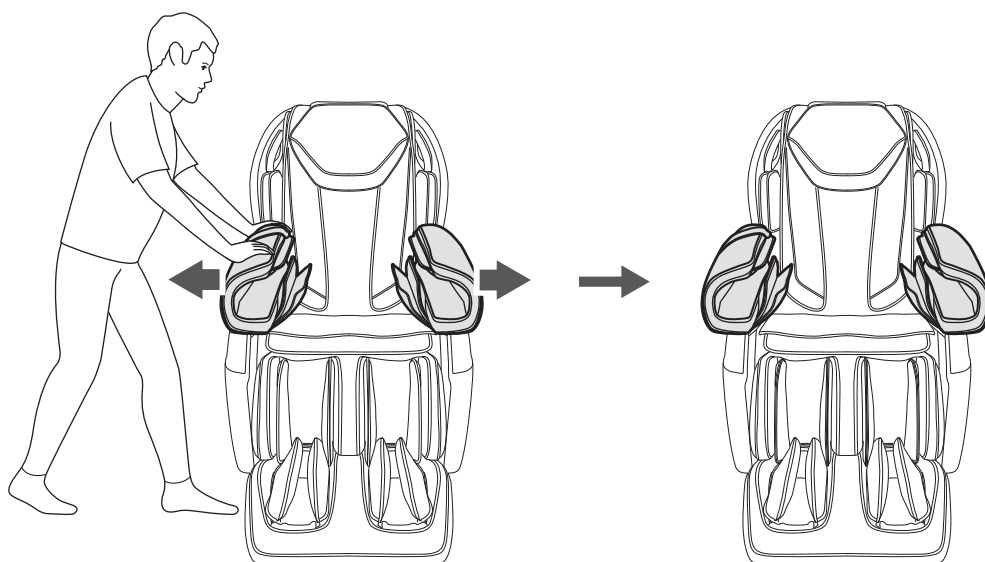

3. アームレストの下部にあるロックレバー（片側2か所）を操作し、ロックする。


ロックレバーは、面ファスナー式の目隠し布で隠れています。目隠し布をめくるとロックレバーがあります。レバーを下向きにして、ロックしてください。
(レバー左向き：ロック解除、レバー下向き：ロック)

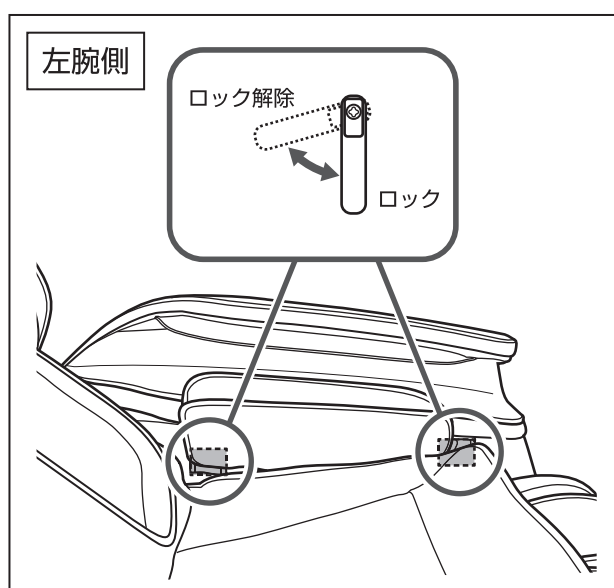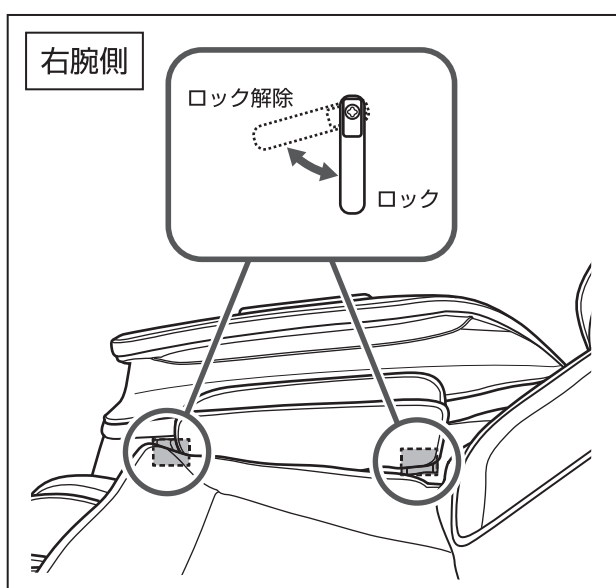

4. アームレストをネジで固定し（片側 2 本）、ファスナーを閉める。

六角レンチでネジを締めてください。


左右同様に行ってください。

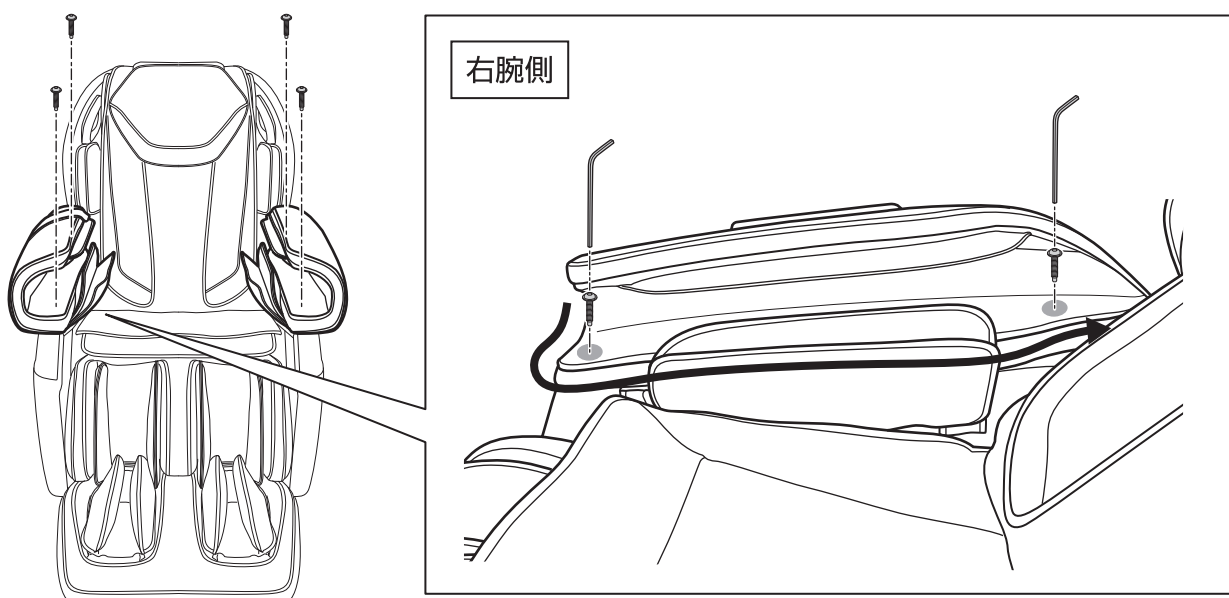

枕の使いかた

枕の取付部を、背もたれ上部のバンドに挟んで固定する。

- マッサージを行うときは、枕を後ろに回すか、取りはずしてお使いください。
- マッサージが強く感じる場合は、枕を付けてお使いください。
- マッサージを行わないときは、枕を取り付けたままソファとしてお使いいただけます。
- バンド部分を持って引っ張ったりしないでください。

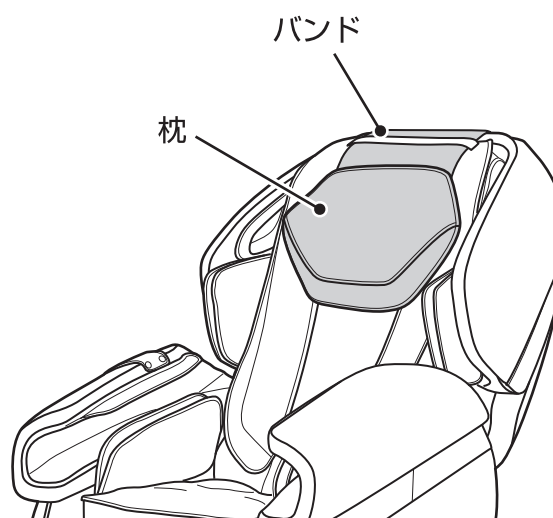

設置と組み立て

電源コードを取り付ける

⚠ 警告

交流 100V 以外の電源は、使用しない。 火災や感電の原因になります。


電源プラグは確実に根元まで差し込む。また、ゴミが付着しないように注意する。

感電やショート・発火の原因になります。

破損している電源コードや電源プラグを使用しない。 感電やショート、火災の原因になります。破損している場合は、ご購入先または当社のお客さま相談窓口にて修理を依頼してください。

1. 電源コードのコネクタを本体後側の下部のインレット(電源コード差込口)に差し込む。

- しっかり差し込んでください。
- 付属の電源コード以外は使用しないでください。
- 電源コードやリモコンコード、電源プラグが傷んだり、電源プラグにゴミがついていないか確認してください。

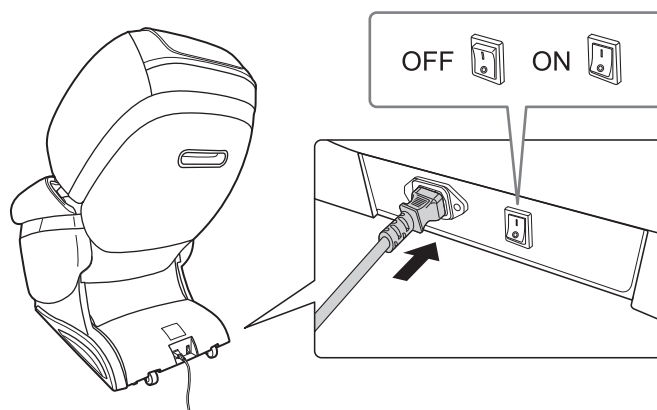

アースを取り付ける

⚠ 注意

アースを確実に取り付ける。

アースを取り付けていないと、故障や漏電のときに感電するおそれがあります。


- 接続してはいけないところ
ガス管……………爆発や引火の危険があります。
電話線や避雷針 …… 落雷のとき危険です。
水道管 …………… 途中がプラスチックの場合は、アースになりません。

電源コンセントにアース端子がある場合

アース線を電源コンセントのアース端子に取り付ける。

電源コンセントにアース端子がない場合

ご購入先・電気工事店に相談し、アース工事(D種<第3種>設置工事・有料)をしてください。

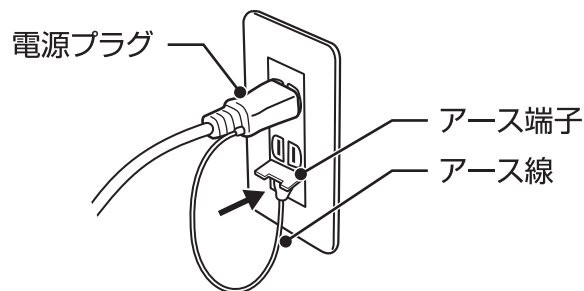


毎回マッサージをはじめる前に

確認する内容

1. 周囲を必ず確認する。


本体の後ろや脚部の前、下など、周囲に人やペットがいないこと、物が無いことを確認する。

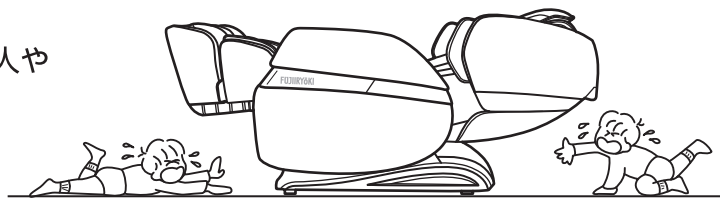

2. 本体を確認する。

- ① 枕を上げて背もたれが破れていないか確認し、その他の部分にも破れがないか確認する。
※小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。
- ② ご使用の前に、本体（背もたれ部、腕部、脚部）に異物がはさまっていないか確認する。
- ③ 座る前にもみ玉の位置を確認する。

- ・もみ玉は通常、収納位置（背もたれの上部）にあります。
もみ玉が収納位置にない場合、一度リモコンの電源を入れ直してください。（リモコンの電源をOFFにすると、もみ玉が収納位置に移動してから電源が切れます。）

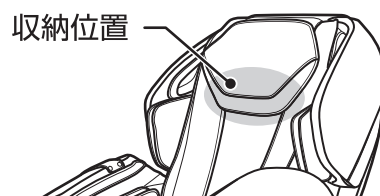

電源を入れる

⚠ 警告

交流 100V 以外の電源は、使用しない。 火災や感電の原因になります。


電源プラグは確実に根元まで差し込む。また、ゴミが付着しないように注意する。

感電やショート・発火の原因になります。

破損している電源コードや電源プラグを使用しない。 感電やショート、火災の原因になります。破損している場合は、ご購入先または当社のお客さま相談窓口へ修理を依頼してください。

1. 電源プラグをコンセントに差し込む。

電源プラグ

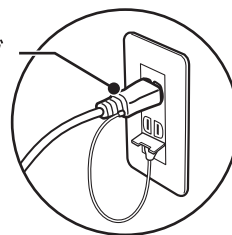

2. 本体の電源スイッチを「ON」にする。


- 電源スイッチは本体後側の下部にあります。
- 背もたれが倒れた状態から電源スイッチを「ON」にすると、自動で背もたれが起き上がり、脚部が下がります。（収納位置）リクライニング動作は  で停止、 で再開します。

電源スイッチ

OFF  ON 

3. リモコンの「電源ボタン」を押して、電源を入れる。

- メインメニュー画面が表示されます。
3 分以上操作がないとリモコンの電源が切れます。

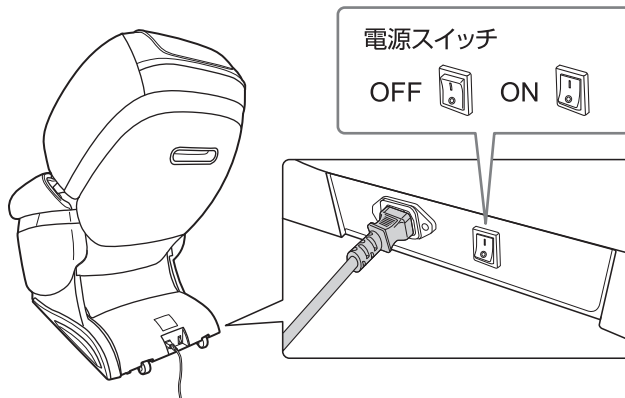

リクライニングの調節

手動でリクライニングを調節する場合

1. リクライニングボタンを押し、お好みで背部・脚部の角度を調節する。



 起こす	 倒す	背部調節ボタン	背もたれの角度を調節できます。(長押し)
 上げる	 下げる	脚部調節ボタン	脚部の角度を調節できます。(長押し)

一定の角度まで自動リクライニングする場合

1. リクライニングボタンを押し、好きな角度のボタンを選択する。



 収納	収納	背もたれ / 脚部を収納状態にします。
 マッサージ	マッサージポジション	マッサージに適した角度までリクライニングします。
 フラット	フラット	一番倒れた状態までリクライニングします。


各種設定

設定

1. 設定ボタンを押す。



2. お好みの設定に調節します。

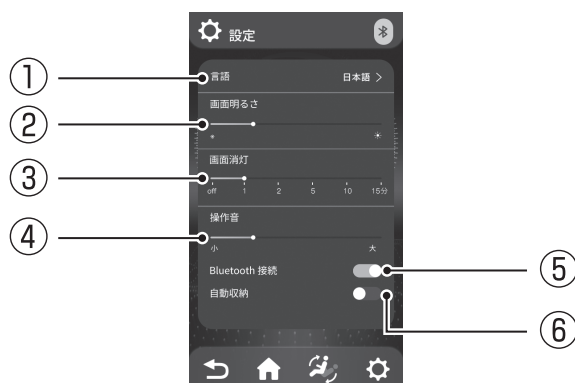


①	言語	言語設定	表示言語を変更します。(日本語 / 英語)
②	画面明るさ	画面明るさ調節	画面の明るさを調節します。
③	画面消灯	画面消灯時間	リモコン操作がないときに画面が消灯するまでの時間を調節します。(画面消灯時は、画面を押すと表示が復帰します。)
④	操作音	操作音の音量調節	リモコンの操作音の音量を調節します。
⑤	Bluetooth 接続	Bluetooth 接続	Bluetooth 機能の ON/OFF を選択します。
⑥	自動収納	チェアの自動収納	リモコンの電源オフ時の自動収納機能の ON/OFF を選択します。

自動コースでマッサージする

自動コースをはじめる

1. 電源ボタンを押して、リモコンの電源を入れる。

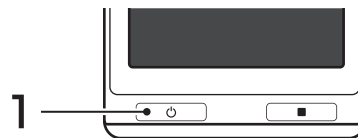

2. 「自動コース」を押し、コースを選ぶ。



メインメニュー



全身マッサージ



ストレッチ



部位別マッサージ

3. 自動でリクライニングし、肩位置検知が始まる。




肩位置検知中



肩位置調節



検出エラー

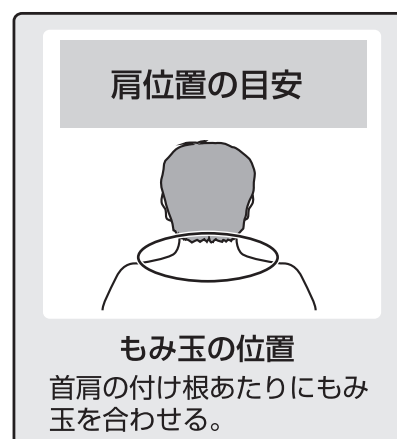

- 検知中は、頭を背もたれから離さないでください。
- 肩位置がずれた場合は、▲▼ ボタンを長押しして調節してください。
- 検出エラーになった場合は、「再検出」を押してもう一度検出を行ってください。
「再検出」を押さなくても、しばらくすると肩位置調節画面に切り替わります。

4. 自動コースが始まる。



マッサージ画面

5. マッサージ開始から約 15 分でマッサージが終了する。

- マッサージが終了すると、もみ玉が収納位置まで戻ります。
- 自動収納が ON の場合、背もたれと脚部が自動で収納位置に戻り、リモコンの電源が切れます。
- 自動収納が OFF の場合、背もたれと脚部は動かず、リモコンの電源が切れます。
収納したいときは、再度リモコンの電源を入れて操作してください。

6. 本体の電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

- 誤ってリモコンを操作して、動き出すことを防止します。

● 自動コース内容

全身マッサージ

	疲労回復	全身を丁寧にくまなくほぐします。
	やすらぎ	軽やかな動きでやさしくもみほぐします。
	じっくり	筋肉をしっかりマッサージします。
	リラックス	ゆったりとした動作でマッサージします。

ストレッチ

	全身	全身の各部位を順番にストレッチします。
	しっかり	全身をハードにストレッチします。
	ととのえ	ゆっくりとした動作でやさしくストレッチします。
	エアー	エアー動作を中心としたストレッチを行います。

部位別マッサージ

	首	首を集中的にほぐします。
	肩	肩を集中的にほぐします。
	腰	腰を集中的にほぐします。
	お尻	お尻周りを集中的にほぐします。

マニュアルマッサージをする

マニュアルマッサージをはじめる

1. 電源ボタンを押して、リモコンの電源を入れる。



2. 「マニュアル」を押す。



3. マニュアルマッサージが始まる。

- マニュアルマッサージでは、もみ技種類・エアーマッサージ部位・マッサージ範囲などを調節できます。詳細は、P21 ～ 23 をご参照ください。



— 現在行っている
もみ技

マニュアルマッサージ

4. マッサージ開始から約 15 分でマッサージが終了する。

- マッサージが終了すると、もみ玉が収納位置まで戻ります。
- 自動収納が ON の場合、背もたれと脚部が自動で収納位置に戻り、リモコンの電源が切れます。
- 自動収納が OFF の場合、背もたれと脚部は動かず、リモコンの電源が切れます。
収納したいときは、再度リモコンの電源を入れて操作してください。

5. 本体の電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

- 誤ってリモコンを操作して、動き出すことを防止します。

マッサージ中の各種調節

つづく

調節オプション（自動コース・マニュアル）

1. マッサージ画面に表示されている各項目はお好みの設定に調節できます。押すたびに、強さ設定やON/OFF が切り替わります。

- 自動コースと、一部マニュアル（もみ技）では「マッサージ速さ」が調節できません。P23 の一覧表をご参照ください。



● リクライニング調節

	収納	背もたれが起き上がり、脚部が下がります。
	フラット	背もたれが倒れ、脚部が上がります。

● マッサージ中の調節オプション

	足裏ローラー	足裏ローラーの ON/OFF を選択します。
	ふくらはぎマッサージ	ふくらはぎローラーと、さすり機能（ふくらはぎ内側）の ON/OFF を選択します。
	ヒーター	ヒーターの ON/OFF を選択します。
	メカ強さ	メカマッサージの強さを調節します。 自動コース：4 段階 マニュアル：首・肩 3 段階、背・腰 2 段階 ※もみ玉が首・肩（上部）にあるときは3段階、背・腰（中部～下部）にあるときは2段階の調節が可能です
	マッサージ速さ	メカマッサージの速さを調節します（5 段階） ※自動コースと、一部マニュアル（もみ技）では調節できません。
	エアー強さ	エアーマッサージの強さを調節します（5 段階）

● ヒーターの使用イメージ

腰まわりを温める場合

背パッドを背中に敷いてください。



お腹まわりを温める場合

背パッドを体の前にかけてください。




マッサージ中の各種調節

マッサージ設定（マニュアル）

1. 「マッサージ設定」を押す。
2. 「もみ技種類」「エアーマッサージ部位」「マッサージ範囲」の3つメニューから調節したいメニューを選択し、お好みの設定に調節してください。

● しばらく操作が無い場合、または「戻るボタン」を押すと、マッサージ画面に戻ります。

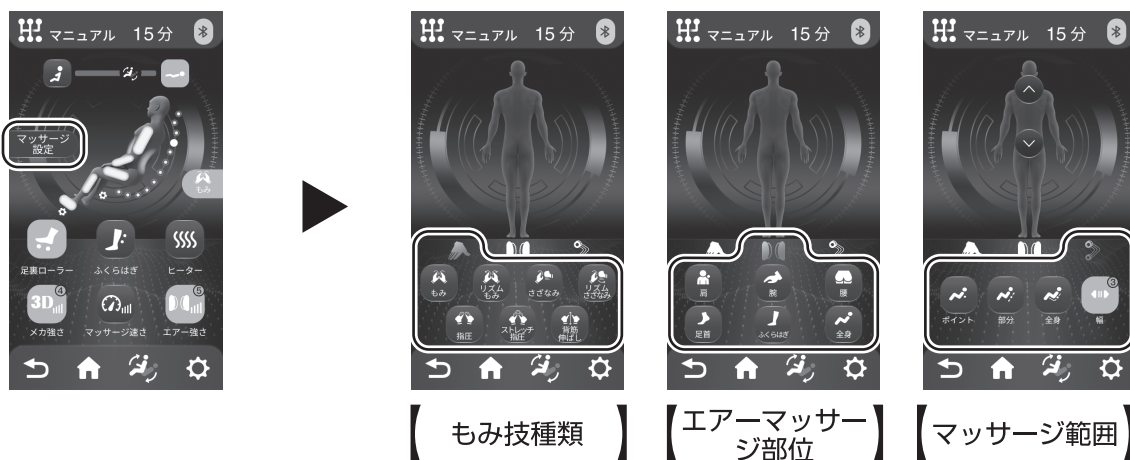

● マッサージ設定

マッサージ設定	マッサージ設定	もみ技種類・エアーマッサージ部位・マッサージ範囲などを調節できます。
---------	---------	------------------------------------

● マニュアル(もみ技)マッサージ設定

	もみ	筋肉をもみほぐします。
	リズムもみ	緩急をつけて筋肉をもみほぐします。
	さざなみ	もみながらたたく動きでマッサージします。
	リズムさざなみ	緩急をつけてもみながらたたく動きでマッサージします。
	指圧	筋肉を押し上げてマッサージします。
	ストレッチ指圧	小刻みに押し上げながら伸ばす動作を行います。
	背筋伸ばし	背筋に沿って筋肉を伸ばします。

● エアーマッサージ部位

	肩エアー	部位別にエアーマッサージの ON/OFF を切り替えます。
	腕エアー	
	腰エアー	
	足首エアー	
	ふくらはぎエアー	
	全身エアー	全てのエアーマッサージの ON/OFF を一括で切り替えます。

● マッサージ範囲

	ポイント	マッサージの範囲を選択できます。
	部分	
	全身	
	幅	もみ玉の幅を切り替えます。(3 段階) ※マニュアル「指圧」「ストレッチ指圧」「背筋伸ばし」のみ調節可能
	もみ玉位置調節	もみ玉の位置を調節します。 ※マッサージ範囲「ポイント」「部分」のときのみ調節可能

● マッサージ機能一覧表

	メカマッサージ					エアーマッサージ		
	強さ	速さ	マッサージ範囲	幅	位置調節	強さ	部位別設定	
もみ	●	●	ポイント/部分/全身	-	●	●	入 / 切可能	肩 / 腕 / 腰 / 足首 / ふくらはぎ
リズムもみ	●	●	ポイント/部分/全身	-	●	●	入 / 切可能	肩 / 腕 / 腰 / 足首 / ふくらはぎ
さざなみ	●	●	ポイント/部分/全身	-	●	●	入 / 切可能	肩 / 腕 / 腰 / 足首 / ふくらはぎ
リズムさざなみ	●	●	ポイント/部分/全身	-	●	●	入 / 切可能	肩 / 腕 / 腰 / 足首 / ふくらはぎ
指圧	●	-	ポイント/部分/全身	●	●	●	入 / 切可能	肩 / 腕 / 腰 / 足首 / ふくらはぎ
ストレッチ指圧	●	-	ポイント/部分/全身	●	●	●	入 / 切可能	肩 / 腕 / 腰 / 足首 / ふくらはぎ
背筋伸ばし	●	-	部分/全身	●	●	●	入 / 切可能	肩 / 腕 / 腰 / 足首 / ふくらはぎ

スピーカーの使いかた

BLUETOOTH 接続で、BLUETOOTH スピーカーから音楽などを聞くことができます。

⚠ 注意

- **大音量で耳を刺激しない。** 大音量で長時間聞くと聴力に悪影響を与えるおそれがあります。

スピーカー使用についての注意

- ご使用の際は BLUETOOTH 機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 万一、接続機器のメモリーなどが消失しても、当社では一切責任を負いません。
- 接続する際は、必ず機器の音量を下げておいてください。
- 本製品の近くに電子機器や発信機（携帯電話など）があると本製品にノイズが入る場合があります。その場合は離して使用してください。
- テレビやラジオのアンテナ付近で使用すると、テレビやラジオにノイズが入る場合があります。その場合は離して使用してください。

BLUETOOTH® について

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器から別の移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の電源をお切りください。そのうえで、当社お客様相談窓口にご連絡頂き、混信回避のための処置についてお問い合わせください。
3. その他、この機器から第二世代小電力データ通信システム、移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合やご不明な点がございましたら当社お客様相談窓口までお問い合わせください。

2.4 FH 1

この無線機器は 2.4GHz 帯を使用します。

変調方式として FH-SS 変調方式を採用し、与干渉距離は 10m です。

本製品は日本の電波法の技術基準に適合しています。貼り付けられているラベルはその証明ラベルです。証明ラベルの貼り付けられた製品を総務省の許可なしに改造、または証明ラベルをはがして使用することはできません。これに違反すると法律により罰せられます。

ほかの機器との同時使用

BLUETOOTH 搭載機器・無線 LAN を使用する機器・電子レンジなど、本製品と同一周波数帯（2.4GHz）の電波を使用する機器の影響によって音声が入り切れるなど電波干渉による障害が発生することがあります。同様に、本製品の電波がこれらの機器に影響を与える可能性もあるため、下記の点に注意してください。

- ー 本製品と同一周波数帯（2.4GHz）の電波を使用する機器を離して設置する。
- ー 病院内では使用しない。

使用上の注意

本製品と接続する機器は、Bluetooth SIG の定める BLUETOOTH 標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。BLUETOOTH 標準規格に適合していても、特性や仕様によっては、本製品と接続できない場合や、操作方法や動作が異なる場合があります。

マッサージ設定（マニュアル）

- 初回接続時は、ペアリング操作が必要です。
- 複数の機器から同時に接続することはできません。
- BLUETOOTH 機器の使い方は、機器の取扱説明書をお読みください。

はじめて接続するとき

1. 電源ボタンを押して、リモコンの電源を入れる。
2. 「設定」を開き、「Bluetooth 接続」が ON になっていることを確認する。

- 「Bluetooth 接続」が ON になっていると、マーク  が白色で表示されます。



3. 接続したい BLUETOOTH 機器（スマートフォン等）を操作し、ペアリング操作を行う。

- 本製品を検索すると BLUETOOTH 機器に「SKS-T1000」と表示されます。
- マッサージチェア本体に近づいた状態で検索してください。
- うまくペアリングできないときは、マッサージチェア本体の電源を入れ直してから、再度お試しください。電源スイッチは本体後側の下部にあります。
- BLUETOOTH 機器の使い方は、BLUETOOTH 機器の取扱説明書をお読みください。

4. 接続が完了するとマーク  が水色で表示される。

- 接続完了後、お好みの音楽等を再生してください。
- 大音量で出力されることがありますので、BLUETOOTH 機器側で音量を下げておいてください。
- マッサージをする場合は、接続完了後、マッサージ操作を行ってください。



2回目以降に接続するとき


1. 電源ボタンを押して、電源を入れる。
2. 接続したい BLUETOOTH 機器（スマートフォン等）を操作し、接続する。

- 接続が完了するとマーク  が水色で表示されます。

Q&A

Q1 左右の強さが異なる。また、段違いに感じる。

A より気持ちよくマッサージするために、もみ玉が交互にたたく機構を採用しており、やむをえずもみ玉の位置がずれて動作することがあります。そのため左右で強さが異なって感じる場合がありますが、故障ではありません。

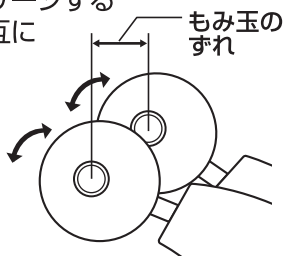

※イラストはイメージです。
実際のもみ玉の形状とは異なります。

Q2 マッサージをより強くする方法はありますか？

A 次のことを試してください。

- 背もたれ部を倒す。
- 深く腰かけ、体をしっかりと背もたれ部に密着させる。

Q3 マッサージを弱くする方法はありますか？

A 次のことを試してください。

- 背もたれ部を起こす。
- 枕をつける。
- 背もたれ部にひざ掛けや毛布などを掛ける。

Q4 身長が約150cm未満の人や、約185cm以上の人は使えないのですか？（脚部に脚がフィットしないなど）

A 背もたれ部と脚部の角度を調節してください。（▶P16）

- 背の低い人
背もたれ部を起こし、脚部を上げる。
- 背の高い人
背もたれ部を倒し、脚部を下げる。

Q5 ホットカーペットを椅子の下に敷いてもいいですか？

A 火災のおそれがあるので、おやめください。ホットカーペットの発熱体を痛め、そこから火災になるおそれがあります。

Q6 1ヶ月の電気代はいくらですか？

A 1日約30分、ヒーターとマッサージを毎日使用した場合、約65円/月です。
1日約30分、マッサージを毎日使用した場合、約47円/月です。
※電力料金目安単価 31円/kWh（税込）の場合で算出。（当社調べ）

Q7 肩位置の自動検出をしても肩位置が合わないのですが？

A 肩位置検知中は、頭を背もたれから離さないでください。肩位置がずれた場合は、  ボタンを長押しして調節してください。（▶P18）

Q8 病院に通院しているけど、使っても大丈夫？

A 通院先の医師とご相談のうえ、使用してください。マッサージは、「触圧刺激」といって、筋肉に圧力をかけてほぐし、血行を促進する行為です。病気によっては悪化を招く可能性もありますので、必ず医師に相談してください。

Q9 マッサージの後、肌が赤くなるのですが？

A 使用後、マッサージのあとが残る場合があります。これはマッサージによるもので、時間とともに消えていきます。

Q10 自動コースの動作がいつもと異なる。

A 同じコースでも、強さ調節やリクライニング動作、もみ玉への負荷のかかり方によって動作のタイミングが変わり、エアーの膨らみ回数、もみ玉の動作のタイミングが変わることがあります。

Q11 ファスナーの取っ手がはずれているのですが？

A お客様による取り外しができない部分のファスナーについては、事故防止のため開けられない仕様となっています。

Q12 「椅子の背面に障害物が検出されました」というメッセージ (①) が表示され、動作が停止した。

A 本体後側には挟み込み防止センサーが搭載されています。(②)
センサーが反応すると警告画面 (①) が表示され、安全のため動作が停止します。センサー部分に人や物が乗ったり、触ったりしていないことを確認してください。




Q13 「アームレストが収納状態になっております」というメッセージが表示され、動作が停止した。

A アームレストを完全に広げずに使用すると、警告画面が表示され、動作が停止します。P11～13「アームレストの準備」を参照し、使用可能な状態にしてからマッサージを行ってください。



Q14 本体の寸法を教えてください。 **A** 下記の図をご参照ください。

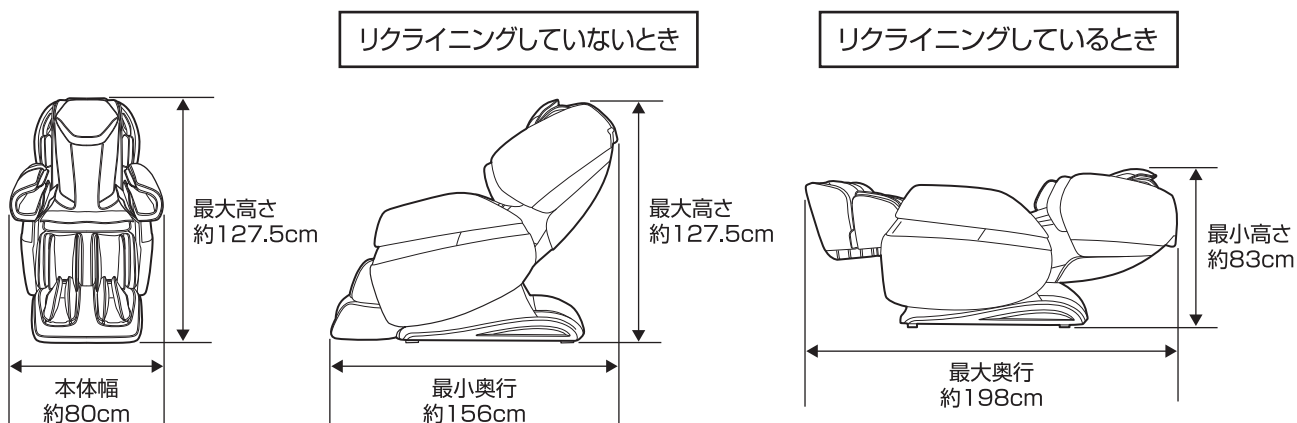

お手入れと保管のしかた

⚠ 警告

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。
感電のおそれがあります。



⚠ 注意

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。
感電やけがのおそれがあります。
- ベンジン・シンナー・アルコール・
アルカリ性洗剤・漂白剤などの薬品でふかない。
変色・変形・感電・引火のおそれがあります。

お願い 定期的にお手入れを行ってください。

本体は清潔にし、温度・湿度・ほこりなどの悪影響が少ないところに保管してください。

張地・枕部分（PUレザー部分）

1. 水で薄めた中性洗剤を布に含ませて、固くしぼり、ふく。
2. 水を含ませて、固くしぼった布で洗剤をふき取る。
3. 乾いたやわらかい布でふき、自然乾燥させる。

- 張地などに色移ることがありますので、色落ちしやすい衣類での使用はご注意ください。
- 整髪料・ヘアケア用品・保湿クリームなどに含まれている成分により、レザー部がひび割れや劣化するおそれがあります。変色や色移りの原因にもなりますので、上記のような商品をご使用の場合は、触れる部分にタオルを敷くなど、直接触れないようにご使用ください。
また、固くしぼったタオルなどで、定期的なふき取りを行うことをおすすめします。
- アイロンをかけないでください。生地を傷めるおそれがあります。

樹脂部分

1. 水で薄めた中性洗剤を布に含ませて、固くしぼり、ふく。
2. 乾いたやわらかい布で洗剤が残らないようふき取る。

- みがき粉などは使用しないでください。キズ、変色、ひび割れの原因になります。

リモコン部分

1. 乾いたやわらかい布でふく。

- 濡れたタオルなどでふかないでください。故障の原因になります。

保管のしかた

⚠ 警告

浴室など湿気の多い場所で使用したり、保管しない。 感電・火災・故障・カビ・サビの原因になります。

本体は汚れやほこりを取った後、温度・湿度・ほこりなどの悪影響が少ないところに保管してください。
長い間使用されていない場合は、カバーなどをかけてほこりが付かないようにしてください。

- 直射日光が長時間当たるところ、ストーブなどの近くの高温になるところには保管しないでください。
変色・変質の原因になります。



警告

絶対に改造しない。また、ご自分で分解、修理をしない。 発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。

- ご使用中に次のような音や感覚がありますが、構造上のもので異常ではありません。
 - ・ もみ玉上下移動時のカタカタ音
 - ・ もみ玉と布のすれる音（特に、もみ動作時）
 - ・ 「速さ」調節による音の違い
 - ・ 「肩」使用時のキシミ音
 - ・ マッサージ動作時、もみ玉への力の加わり方によっては、動作スピードが変わる場合があります
 - ・ エアー動作時のコンプレッサーの動作音ならびにエアーの排気音
 - ・ エアーバッグが膨らむ／縮むときに出る音（腕エアー等、左右で音に差が生じることがあります）
 - ・ リクライニング時の背もたれ部や座部のこすれ音（キュー音）
 - ・ 左右のもみ玉の高さが異なる（交互たたき機構を採用しているため、やむをえず発生します）
- 縫製の特性上、部分的に軽微なしわや弛みが生じる場合がありますが、不良品ではありません。
- 生地特性上、ややにおいが感じられる場合がありますが、異常ではありません。

こんなときは	ここを点検してください	対応のしかた	参考ページ
動作しない	電源プラグまたは本体側のコネクタが抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに、コネクタをインレットに差し込んでください。	P14、15
	本体後側の下部にある電源スイッチが「OFF」になっていませんか？	電源スイッチを「ON」にしてください。	P14、15
動作が途中で止まる (リモコンを押しても動作しない)	無理な力がかかっていませんか？ (安全のため、もみ玉に無理な力がかかると安全装置が働き、全ての機能が停止します。)	一旦背もたれ部から体を離し、本体後側の下部にある電源スイッチを入れ直し、もう一度初めから操作し直してください。	P6、15
	長時間連続で使用していませんか？	長時間連続で使用するとモーターの温度が上昇し、安全装置が働きます。 1時間程度、本体を停止させてください。	—
リクライニングができない	電源プラグまたは本体側のコネクタが抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに、コネクタをインレットに差し込んでください。	P14、15
	背もたれ部が壁や障害物に当たっていませんか？	障害物に当たらないように本体を移動してください。本体後側の下部にある電源スイッチを入れ直してください。	P6、9、15
リモコンに警告画面が表示された	「椅子の背面に障害物が検出されました」と表示され、動作が停止した。	Q&A「Q12」をご参照ください。	P27
	「アームレストが収納状態になっております」と表示され、動作が停止した。	Q&A「Q13」をご参照ください。	P27

お願い 上記の対応を行っても、正常に動作しない、または同じようなことが度々生じる場合には、本体の電源を「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いたうえで、ご購入先、または当社のお客さま相談窓口までお問合せください。

故障かなと思ったら

BLUETOOTH接続について

■ ペアリングができない

- マッサージチェアと BLUETOOTH 機器の距離を 1m以内に近づけてください。
- マッサージチェア本体の電源を入れなおしてから再度お試しください。
- BLUETOOTH 機器のプロファイルを設定してください。
設定方法は、BLUETOOTH 機器の取扱説明書をお読みください。

■ 接続できない

- 「設定」を開き、「Bluetooth 接続」が ON になっていることを確認してください。
- 同時に複数の機器から BLUETOOTH 接続を行う事はできません。
- 既にマッサージチェアと他の機器が BLUETOOTH 接続中の場合、新しく別の機器から BLUETOOTH 接続を行う事はできません。

■ 音が出ない／音が小さい

- リモコンの BLUETOOTH マークが水色（接続完了）で表示されているか確認してください。
- BLUETOOTH 機器を操作し、音量を大きくしてください。
- マッサージチェアと BLUETOOTH 機器の間に障害物を無くし、距離を近づけてください。
- BLUETOOTH 機器の音声出力先を BLUETOOTH 接続に切り換えてください。

■ 音が割れる／ノイズが出る／音が途切れる

- BLUETOOTH 機器を操作し、音量を小さくしてください。
- 音楽等を再生中に、他の BLUETOOTH 機器から接続試行・検索された場合、ノイズ・音途切れの可能性があります。
- マッサージチェアから電子レンジ、無線 LAN などの機器を離してください。
- マッサージチェアからテレビ、ラジオやチューナー内蔵機器を離してください。
これらの機器に影響を与える場合があります。
- BLUETOOTH 機器のイコライザー設定をオフにしてください。
- マッサージチェアと BLUETOOTH 機器の間に障害物を無くし、距離を近づけてください。

- BLUETOOTH 機器（スマートフォンなど）の操作に関しては機器により操作が異なるため、お持ちの BLUETOOTH 機器の取扱説明書をお読みください。

お願い 上記の対応を行っても、正常に動作しない、または同じようなことが度々生じる場合には、本体の電源を「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いたうえで、ご購入先、または当社のお客さま相談窓口までお問合せください。

愛情点検

⚠ 注意

しばらく使用していなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、本体が正常に動作することを確認してから使用する。 事故やけがのおそれがあります。



愛情点検
長年ご使用の場合は
点検をぜひ!

このような症状はありませんか。

- こげくさい臭いがする。
- 電源コード、電源プラグが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため本体の電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いたうえで、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問い合わせください。

お願い

- 本体及び付属品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。詳しくは、各地方自治体にお問い合わせください。

保証とアフターサービス

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にご連絡ください

● 保証書

お買い上げの際に保証書をご購入先からお受け取りになり「お買い上げ日」・「ご購入先名」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間 保証書に記載

● 補修用性能部品の保有期間

当社は本機の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

P29～30に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いたうえで、ご購入先にご連絡ください。

● 保証期間中に修理を依頼される場合

ご購入先にご相談ください。保証書の記載内容に従って修理いたします。
(なお、保証期間中でも有償修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。)

● 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合

まずご購入先にご相談ください。
修理により、製品機能が維持できる場合には、ご要望に従い有料にて修理いたします。

● その他ご不明な点がある場合

アフターサービスに関するご相談、ならびにご不明な点は、ご購入先、または当社のお客様相談窓口までお問い合わせください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。修理料金は、ご購入先、または当社お客様相談窓口までお問い合わせください。

技術料 診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

医療機器の修理に関して

本製品は医療機器です。医療機器の修理には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づき修理する商品および修理の方法に応じて厚生労働省令で定める区分に従い、事業所ごとで許可を受けた修理業者による修理が必要です。この為、お客様ご自身の分解・修理のご要望はお受けできませんのでご了承ください。

仕様

販売名		マッサージチェア HJ25
品番		SKS-T1000
類別		機械器具 77 バイブレーター
一般の名称		家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000)
医療機器認証番号		307AHBZX00005000
定格	電源 (50/60Hz)	AC100V
	時間	30 分
	入力 (消費電力)	140W (待機電力 : 3.7W)
	電動機消費電力	100W
	電熱器消費電力	40W
メカ(もみ玉)マッサージ 速さ調節範囲	もみ	5 段階調節 (① : 約7回/分 ② : 約12回/分 ③ : 約17回/分 ④ : 約21回/分 ⑤ : 約25回/分)
	たたき	5 段階調節 (① : 約275回/分 ② : 約325回/分 ③ : 約370回/分 ④ : 約420回/分 ⑤ : 約455回/分)
	上下移動	約 1.9 ~ 4.7cm/ 秒
脚部ローラー速さ調節範囲 (円柱側面刺激自転回数)	ふくらはぎ	約 37 回 / 分
	足裏	約 28 回 / 分
ヒーター設定温度		約 38 ~ 45℃ (室温 20℃~25℃の場合) ※室温等により体感温度が異なる場合があります。
エアーマッサージ空気圧		約 32kPa ~ 48kPa
メカ(もみ玉)マッサージ強さ調節		自動コース : 4 段階調節 マニュアル : 首・肩 3 段階調節、背・腰 2 段階調節
エアーマッサージ強さ調節		5 段階調節
オートタイマー		約 15 分
リクライニング角度		約 117 度~約 157 度
寸法	リクライニングしていないとき	幅 約80×奥行 約156×高さ 約127.5cm
	リクライニングしたとき	幅 約80×奥行 約198×高さ 約83cm
質量		約 101kg
張地		PU レザー
製造元	XIAMEN HEALTHCARE ELECTRONIC CO.,LTD. (CHINA)	
製造販売元	株式会社フジ医療器	

通信仕様

通信方式	Bluetooth 標準規格 Ver.5.3 準拠
出力	Bluetooth 標準規格 Power Class2
最大通信距離	見通しの良い状態で 10m 以内
使用周波数帯域	2.4GHz 帯 (2.402GHz ~ 2.480GHz)
変調方式	GFSK (BR 1M) $\pi/4$ DQPSK (EDR 2M) GFSK (LE 1M)
対応 Bluetooth プロファイル	AVRCP V1.6.2/A2DP V1.3.2/AVDTP V1.3/GAVDP V1.3/HFP V1.8/SPP V1.2/GAP/GATT
対応コーデック	SBC

 **Bluetooth**® 「BLUETOOTH® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社フジ医療器はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。」

MEMO

販売名	マッサージチェア HJ25	品番	SKS-T1000	製造番号		
保証期間	お買い上げの日から1年間			保証対象	本体（但し、消耗品は除く）	
ご購入者	フリガナ				お買い上げ日	年 月 日
	ご芳名	様			ご購入先	
	ご住所	〒				
	電話 ()				電話 ()	

※ 製品をご購入の際は、保証書にお買い上げ日及びご購入先が記入されているかご確認ください。記載がない場合は、ご購入先へお申し出いただくか、納品書、レシートなどお買い上げ日及びご購入先が分かる書類を添付して大切に保管してください。

【無料修理規程（一部抜粋）】保証の範囲や消耗品について、詳しくはフジ医療器ホームページ内「メーカー保証規程」、もしくはお客様相談窓口にてご確認ください。

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - ① 無料修理をご依頼になる場合には、ご購入先にお申し出ください。
 - ② ご購入先に無料修理をご依頼になれない場合には、取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
 - ③ この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書を呈示ください。
※離島又は離島に準ずる遠隔地の出張修理/交換作業に伴う費用が発生する場合がございます。
- ご転居の場合、修理のご依頼先等は、ご購入先または取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるご購入先に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合などには有償修理になります。※故障及び損傷の状況によっては修理できない場合もございます。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ② 購入後の取扱いが適正でない為に生じた故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ 本書の呈示がない場合
 - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、ご購入者名、ご購入先の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

年 月 日	修理内容及び使用部品	担当者

※ お客様にご記入いただいた保証書の内容は保証期間内のサービス活動及びその後の点検活動のため記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※ 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
お客様相談窓口 フリーダイヤル ☎ 0120-027-612

お客様相談・サイバーセキュリティ問合せ窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱いなどのご相談は、まずご購入先へご連絡ください。

フリーダイヤル ☎ **0120-027-612** 受付：月曜～金曜 午前9時～午後5時30分
※土日祝日、年末年始、夏季休業日を除く。

FAX・Webでの受付も行っております。

FAX番号 **06-4793-0818**

Web フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。

フジ医療器ホームページ **www.fujiiryoki.co.jp**

FAX・Webでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくための、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

美と健康の総合メーカー
株式会社 **フジ医療器**

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階

お客様へ…ご購入年月日・ご購入店名を記入されると便利です。

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	TEL

2025年4月24日（第1版）