

FUJI RYŌKI

耳かけ型 VI/SA

FUJI BACH Köln/Bonn



声が届く、心が届く。

FUJI BACH

Hearing voices means hearing hearts.

FUJIIRYŌKI

FUJI BACH

Hearing voices means hearing hearts.



フジ医療器の想いを込めた補聴器は、ドイツの音楽家バッハが多くの人々に愛されているように、FUJI BACHもまた、みなさまが美しい音楽や日常の音をもっとクリアに聞き、心に響かせるための、パートナーでありたいと願っています。



フジ医療器と補聴器

1954年創業以来、マッサージチェアの販売を続ける中で、様々な健康のお悩みをお持ちのお客様と向き合ってきました。特にきこえに悩まれている方は多く、25年以上に渡ってフジ医療器は補聴器を皆様にお届けしてきました。

その中で、まだまだ多くの方に商品が届いていない現状や、「きこえる喜び」をもっと身近に感じてほしいという思いが募り、オリジナルブランド補聴器“FUJI BACH(フジバッハ)”は生まれました。



まずは、自分の「きこえ」を知ることから。

くらしの「きこえ」についてチェックしましょう。

家族から
テレビの音が
大きいと言われる

聞き間違いが多い


話しかけられたとき、
聞き返す
ことが多い

銀行や病院の
窓口などで、
名前を呼ぶ声が
聞こえにくい

年齢と聴力の関係

聴力の衰えは一般的に30歳代からはじまり、特に高音域から低下していきます。加齢性難聴の特徴として、高い音から聞き取りづらくなります。高い音が聞こえにくくなると言葉の母音は聞こえるものの、子音を聞き取る力が低下していきます。例えば「佐藤さん」と「加藤さん」、「広い」と「白い」のような言葉の聞き間違いが起こりやすくなります。


加齢による聴力の一般的な傾向

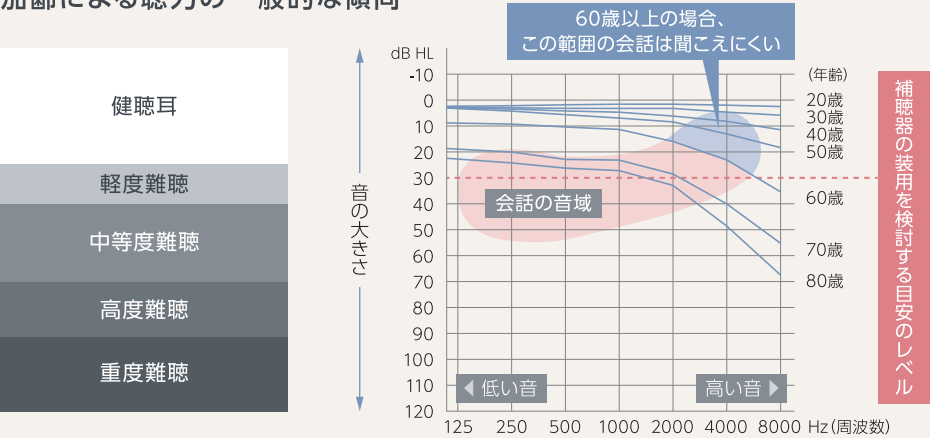

出典: 立木考「よくわかる難聴」金原出版 (2007) / 立木考 他「日本人聴力の加齢変化の研究」/『Audiology Japan』 45.241~250 (2002) より改編

耳の仕組みと難聴の種類

耳は「外耳」「中耳」「内耳」の三つの部分に分かれ、どの部分に障害があるかによって難聴の性質が異なります。

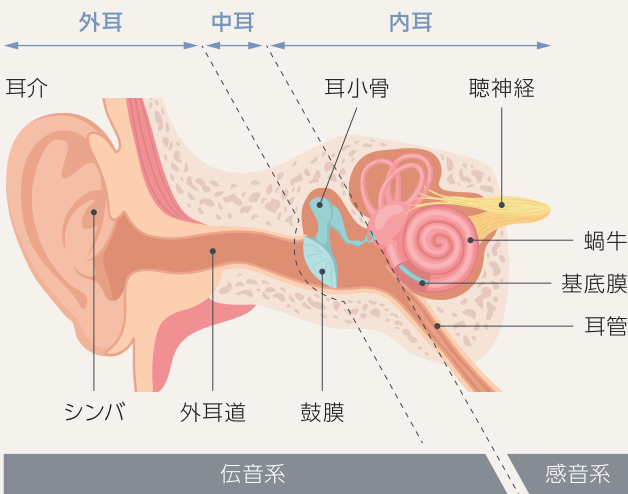

- [外耳] 空気振動となって伝わってきた音を効率よく集音し、外耳道で増幅を行いながら鼓膜によって機械的な振動に変換します。
- [中耳] 鼓膜によって交換された機械的振動を大きく増幅します。
- [内耳] どんな音が入ってきたかを感じ取り、かつその音を電気的な刺激へ変換します。その刺激が、聴神経を通り、脳へ伝えられます。

難聴の種類

伝音難聴

鼓膜の損傷や中耳炎が代表的なものです。大部分は医学的治療によって聴力を回復させることができます。もし難聴が残っても補聴器を使用することで言葉の聞き取りは大きく改善されます。

感音難聴

聞こえにくいだけでなく音の強弱に対する感覚障害や言葉の聞き間違いなどが起こります。医学的治療は難しく、補聴器にも高度な処理が要求され、ある程度のトレーニングも必要です。

混合性難聴

伝音系・感音系の両方に原因が生じた障害です。こちらも同様に補聴器の高度な処理やトレーニングを要します。

FUJI BACH 補聴器対応環境とクラス

使用環境や用途に合わせて補聴器をお選びください

静か

とても騒がしい

				ご自宅の リビング	お散歩・ ウォーキング	ご自宅の台所	混雑した街中	買物	飲食店	病院・ デイサービス	特別に 騒がしい時間	
特長・機能	紛失・ 破損 保証		共通 機能									[レーダーチャートの項目] 音:音の豊かさ 快:快適性 騒:騒音下での聞き取り 保:保証 ワ:ワイヤレス、アプリ 方:方向感
		バンド 原音に近い 音を再現		雑音抑制 雑音と音声を 区別して抑制	風切抑制 風切り音を抑え 屋外でも 聞き取りやすく	衝撃抑制 衝撃音を抑え 聞き取りを 快適に	自動声 センサー+ 音の方向感や 距離感を 得やすい	自動 ボリューム 音環境を 認識して自動で 音量を調整	正面 フォーカス 騒音下で 正面の会話に フォーカス	自動 雑音抑制 音環境に合わせ 自動で雑音を 抑制	インテリジェント 機能 音声学習を 使って会話を 聞きやすく	
クラス												
FUJI BACH Köln (フジバツハ ケルン)	プレミアム 9	2年 2回	17	ワイヤレス	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	
	ハイグレード 7	2年 1回	14	テレビや電話の音声を 直接補聴器に届ける	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆		
	スタンダード 5	1年 1回	12	スマホ連携	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★☆☆		
	ベーシック 4	1年 1回	12	スマートフォンの音声を 補聴器にストリーミング	★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★★			
FUJI BACH Bonn (フジバツハ ボン)	バリュー 4 3	—	12		★★★☆☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★★			

★の数が多いほど性能が高いことを表します



フジバツハケルン
FUJI BACH Köln 9/7/5/4 RIC

IP68

スマホ
連携

AI
搭載

充電式



Sand サンド

Gold ゴールド

Bronze ブロンズ

医療機器認証番号:307ABBZX00009000

騒音下でも鮮やかな聞き取りができるAI補聴器

学習データを基にした雑音抑制が騒音下での聞き取りをサポートします。新機能インテリジェントフォーカスで、聞きたい音にフォーカスしやすくなり、聞き取りのストレスを軽減します。

補聴器クラス別 価格と機能一覧 (FUJI BACH Köln 9/7/5/4 RIC)

9	紛失・破損保証 2年2回	故障保証 3年	[両耳] 1,273,000円 [片耳] 653,000円
7	紛失・破損保証 2年1回	故障保証 2年	[両耳] 893,000円 [片耳] 463,000円
5	紛失・破損保証 1年1回	故障保証 2年	[両耳] 613,000円 [片耳] 323,000円
4	紛失・破損保証 1年1回	故障保証 2年	[両耳] 433,000円 [片耳] 233,000円

バッテリー付き充電器 33,000円(税込) 込みの価格です。補聴器本体は非課税です。

	雑音抑制	風切抑制	衝撃抑制	自動声センサー	自動ボリューム	正面フォーカス	自動雑音制御	インテリジェント機能	オーラキャスト
9	インテリ	強	強	360	●	インテリ	●	●	●
7	強	強	強	オールアクセス	●	フロント	—	—	●
5	中強	中	中	オールアクセス	●	ウルトラ	—	—	●
4	中	中	中	両耳連動Ⅲ	●	—	—	—	●

最新の補聴器で暮らしが広がる



インテリジェントフォーカス機能※

雑音を抑制し聞きたい声をクリアに
 ※FUJI BACH Köln 9 RICのみ



IP68の防水防塵設計

汗や湿気、ホコリや水に強い撥水加工



次世代の音声技術Auracast™対応

対応する施設等の音声を直接受信可能



バッテリー付き充電器


LEDライトで電池残量も見やすい



小さなサイズでクリアな聞き心地 インテリジェント機能搭載※

目立ちにくく快適な装用感の設計と、補聴器の表面と内部部品にも撥水コーティングを施しています。また、周囲の状況を把握できるよう自然なきこえを保ちながら正面の会話にフォーカスします。

※FUJI BACH Köln 9 RICのみ

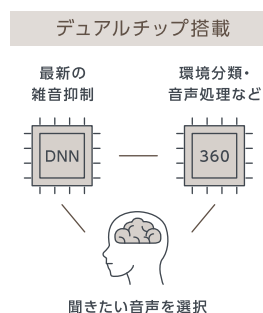

サウンドパラメータ
390万通りを検証

日本語を含む
1,350万の会話で学習

1日あたり
4兆9,000億回演算できる

便利なAuracast™標準搭載

Auracast™は、音声を多数のデバイスに同時配信できる次世代の音声技術で、対応する補聴器やデバイスによって、公共交通機関や映画館、ホールなどの混雑した空間や騒音のある環境でもクリアな音声を直接受信できます。



一日中使えるバッテリーと 使いやすい充電器

補聴器を1度フル充電すれば、テレビ音声や音楽のストリーミングを行っても、1日中安心してお使いいただけます。充電器本体をフル充電しておけば、補聴器3回分の電力を保持しておくことができます。



バッテリー付き充電器



使いやすい充電機能

充電器本体の蓄電で補聴器3回を充電

小さなサイズ

手のひらに収まるほどのサイズで持ち運びに便利

分かりやすいLED

LEDライトで補聴器と充電器の電池残量をお知らせ



フジバツハボン
FUJI BACH Bonn 4/3 RIC

IP68 スマホ連携 充電式



Sand サンド

医療機器認証番号: 307ABBZX00008000

音声を判別して雑音を抑制、会話に強い補聴器

どこから話しかけられているか、誰から話しかけられているかが直感的にわかる、自然な音を届けます。音声を判別して雑音のみを抑制し、環境に合わせて自動でボリュームを調整。方向や距離が感覚的にわかる自動声センサー+を搭載しています。

補聴器クラス別 価格と機能一覧 (FUJI BACH Bonn 4/3 RIC)

4	故障保証 2年	[両耳] 337,600円 [片耳] 177,600円
3	故障保証 2年	[両耳] 277,600円 [片耳] 147,600円

デスクトップ型充電器 17,600円(税込) 込みの価格です。補聴器本体は非課税です。

	雑音抑制	風切抑制	衝撃抑制	自動声センサー+	自動ボリューム	オーラキャスト	ストリーミング
4	中	中	中	両耳連動Ⅲ	●	●	●
3	弱	弱	弱	—	—	●	●

使いやすさを追求した快適機能



自動声センサー+

会話を楽にスムーズに音声を自動調整



人間工学に基づいたデザイン

耳にかくれる小さな本体で快適な装着感



IP68の防水防塵設計

補聴器が水や汗で濡れても大丈夫



次世代の音声技術Auracast™対応

対応する施設等の音声を直接受信可能



補聴器の保証について

紛失・破損

紛失・破損保証 (無料)

補聴器本体の紛失またはお客様の過失による損傷の場合、規定の回数に限り無償にて同等品交換、または修理対応致します。
※ただし紛失保証時には、保証書と共に遺失届が必要です。

故障

故障保証 (無料)

自然故障が生じた場合は無償にて修理いたします。

上限金額

新ほっとシステム

保証期間終了後も、お買い上げ日から4年目までは1回につき40,000円を上限とし、これを超える修理費用はご請求いたしません。
※自然故障の場合のみ適用されます。修理費用は補聴器1台につきの金額です。

		1年目	2年目	3年目	4年目
プレミアム 9	紛失保証	2年2回無料			
	故障保証	3年無料			新ほっとシステム
ハイグレード 7	紛失保証	2年1回無料			
	故障保証	2年無料		新ほっとシステム	
スタンダード 5 ベーシック 4	紛失保証	1年1回無料			
	故障保証	2年無料		新ほっとシステム	
バリュー 4 3	故障保証	2年無料		新ほっとシステム	

きこえ広がるワイヤレスアクセサリー

補聴器をより長く、より簡単に、性能をより引き出しお使いいただける各種ワイヤレスアクセサリーです。



バッテリー付き充電器
33,000円(税込)
生産国:中国



デスクトップ型充電器
17,600円(税込)
生産国:中国



補聴器仕様表

販売名	型番	価格	適応聴力範囲		最大音響 利得	90dB入力最大出力 音圧レベル	使用 電池	電池 寿命 (時間)
					HFA-FOG (±5dB)	ピーク (+3dB SPL以下)		
耳かけ型 VI	FUJI BACH Köln (フジバツハ ケルン) 9/7/5/4	9[両耳]1,273,000円 [片耳]653,000円 7[両耳]893,000円 [片耳]463,000円 5[両耳]613,000円 [片耳]323,000円 4[両耳]433,000円 [片耳]233,000円 バッテリー付き充電器 33,000円(税込) 込みの価格です。 補聴器本体は非課税です。	LP	軽度～中等度	50	113	充電電池	24
			MP	軽度～中・高度	55	115		
			HP	中等度～高度	54	120		
			UP※1	中等度～重度	65	129		
耳かけ型 SA	FUJI BACH Bonn (フジバツハ ボン) 4/3	4[両耳]337,600円 [片耳]177,600円 3[両耳]277,600円 [片耳]147,600円 デスクトップ型充電器 17,600円(税込) 込みの価格です。 補聴器本体は非課税です。	LP	軽度～中等度	50	113		
			MP	軽度～中・高度	55	115		
			HP	中等度～高度	54	120		
			UP※1	中等度～重度	65	129		

※1 有料オプションのカスタムモールドUPレシーバ(補聴器と同時購入時(非課税)：12,000円、別途購入時(課税、税込)：21,780円)が必要です。
最大音響利得は入力音圧50dB SPL。本データはJIS C 5512:2015の2cm³カプラにより測定、表示してあります。
電池の寿命は規準の状態で測定した値。調整や使用状況により異なります。ワイヤレス機能使用時は電池寿命が短くなります。

Auracast™ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標です。

お客様相談窓口のご案内

フジ医療器フリーダイヤル

0120-027-612

受付:平日9:00～17:30
(土日祝日・年末年始・夏季休業日は除く)

Web

www.fujiiryoki.co.jp

FAX番号

06-4793-0818

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受付けております。
Web・FAXでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。
修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

美と健康の総合メーカー

株式会社

フジ医療器

〒540-0011
大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
www.fujiiryoki.co.jp

このカタログの内容についてのお問い合わせは、下記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●お求めは…

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●写真・イラストは全てイメージです。●本カタログの記載内容は、2025年10月現在のものです。